

Enkel

Snabb

Skonsam

SpeediCath® Compact Set

Tappningskateter för kvinnor

En allt-i-ett-kateter för ökad frihet



Produktinformation

Användning

SpeediCath Compact Set Female är en steril tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren intermitterent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret. Flöde uppstår pga att trycket på utsidan är lägre än trycket i urinblåsan.

Indikationer

Steril tappningskateter för intermitterent kateterisering.



Fördelar

- Klar-att-använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Polerade kateterögon - för maximal komfort
- Enkel¹, snabb¹ och skonsam² kateterisering
- Integrerad lösning med både kateter och urinpåse i en och samma produkt
- Enkel att använda för personer som inte kan katetrisera direkt i toaletten
- Minimal förberedelse och få handhavandesteg
- Enkel att öppna, även för personer med nedsatt handfunktion
- Integrerat handtag som ger en hygienisk kateterisering
- Skräddarsydd för den kvinnliga anatomin
- Diskret och kompakt design som leder till följsamhet och bättre livskvalitet³
- Diskret och enkel att ta med och förvara
- Återförslutningsbar kateter för praktisk och hygienisk kassering
- Klar vätska utan risk för fläckar
- PVC-, latex- och ftalatfri

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM-19332
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2021-11 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

 **Coloplast**

Varningar och försiktighet

SpeediCath Compact Set Female är avsedd för engångsbruk och återanvändning av produkten kan ge upphov till en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, rengöring, desinficering och/eller sterilisering kan försämra produktens egenskaper och utsätta användaren för ökad risk för fysiska skador eller infektion.

Vårdpersonal ska kontaktas innan man utför självkateterisering för första gången.

Vårdpersonal ska kontaktas i händelse av en urinvägsinfektion med symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

Vårdpersonal ska rådfrågas om man som användare har fått diagnosen urinrörsförträngning.


SpeediCath Compact Set Female ska inte användas om förpackningen är skadad.

Funktioner

Klar att använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

Avfasade, atraumatiska kateterögon

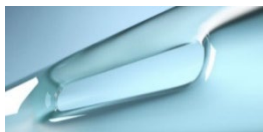

Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterens yta och göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

Unikt hydrofilt ytskikt

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggd enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppyskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.



3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

Produktsortiment

SpeediCath Compact Set	Ch storlek	Längd cm	Volym ml	Antal/fp.	Coloplast art nr
Nelaton för flickor/kvinnor	o 12 ● 14	9* 9*	750 750	20 20	285229 285249

*Kateterlängd exkl. handtagsdel

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SpeediCath Compact Set Female ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på coloplast.se.

Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

Förvaring

Förvaras horisontellt, i rumstemperatur och torrt. Skyddas mot direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.

Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.
3. Chartier-Kastler E et al. A prospective, randomized, crossover, multicenter study comparing quality of life using compact versus standard catheters for intermittent self-catheterization. J Urol 2013;190(3):942-947.

