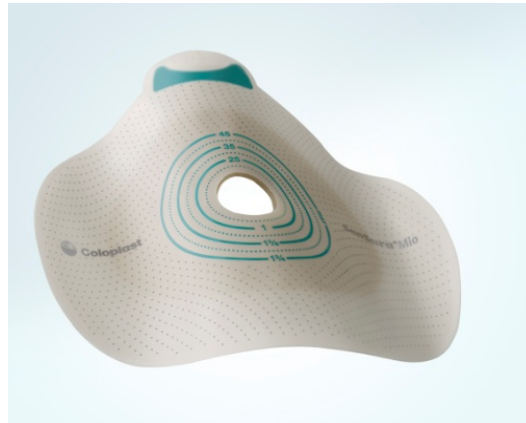


FAKTABLAD / Nya SenSura® Mio / 2016-06-21

Ny elastisk häfta

Nya SenSura® Mio har en elastisk häfta som passar alla kroppsformer och följer kroppens rörelser, vilket garanterar ett optimalt skydd mot läckage. Häftan är gjord av en mix av polymerer och hydrokolloider som gör den mjuk och mycket elastisk. Häftplattan har dessutom en förbättrad absorptionsförmåga, som förhindrar fukt utan att irritera huden och som även klarar frätande avföring och urin.

**Påse i ny färg och nytt material**

Nya SenSura® Mio är tillverkad i vävd textil, som gör att den ser ut och känns som ett klädesplagg snarare än en sjukvårdsprodukt. Den släta väven är mjuk mot huden, är vattenavstötande och ger låg friktion mot alla typer av kläder.

Påsens unika grå nyans är designad för att inte synas under kläderna, den gör påsen närmast osynlig till och med under vita klädesplagg. Den varma grå färgen är kliniskt prövad, patentsökt och fungerar under alla typer av kläder och hudfärger.




Påsen har ett inspektionsfönster som gör det lätt att inspektera stomin. Kopplingen är placerad så att påsens överdel inte blir för tung och faller framåt i takt med att den fylls, vilket gör den mer diskret.

Nytt filter som skyddar mot ballooning

Stomibandagen i SenSura® Mio-sortimentet är alla utrustade med ett nytt cirkelformat filter som reducerar risken för ballooning* med 61 procent jämfört med äldre modeller. Filtret är 10-15 gånger större än tidigare filter och dessutom dubbelsidigt. Det nya filtret renar gaserna innan de når påsen, därigenom undviks dålig lukt.

*Med ballooning menas att påsen blåser upp sig på grund av ett igensatt filter.

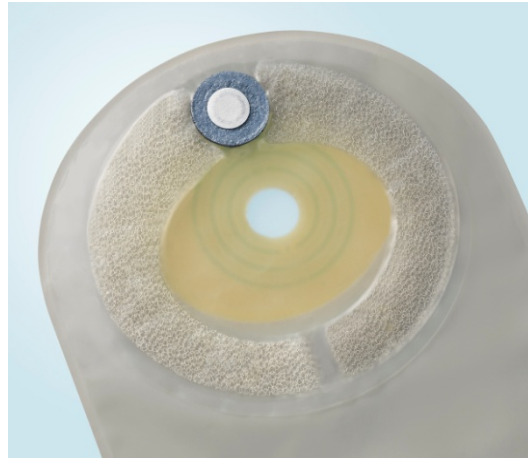

Ny innovativ klickkoppling

Den nya klickkopplingen har fått en innovativ lösning i form av en vågformad låsring designad för ett ge högsta trygghet och säkerhet. Ett hörbart klick talar om för användaren att påsen är säkert fixerad mot basplattan.

SenSura® Mio finns också med Flex-kopplingsystem där en mjuk, flexibel och självhäftande koppling fäster påsen mot basplattan.

