

SenSura[®] Mio Convex Flip 1-dels uro

Böjd passform för utbuktade områden

SenSura[®] Mio Convex Flip



Det finns en SenSura[®] Mio för varje kropp


SenSura[®] Mio Convex Flip

SenSura Mio Convex Flip är det första stomibandaget framtaget för att passa utbuktade kroppsprofiler som t ex bröst.

En böjd stjärnformad basplatta med flikar omfamnar kroppen och ger färre veck och rynkor.

En stabiliseringsring stabiliserar mittendelen så att stomin får det stöd den behöver.

Flexzoner i mitten och i kanterna maximerar passform och flexibilitet vid rörelser.

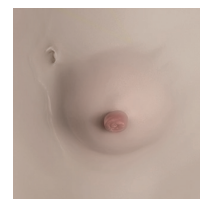

Utbuktad kroppsprofil

Diskretion med ett personligt utseende och känsla

Elastisk häfta - Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning.

Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

Inspektionslucka - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

Utlopp för tömning av urin.

1-dels urostomipåse Convex Flip

Neutralt grå	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	10-40 mm ×	S	738308	184000	10	300 ml
Midi	10-40 mm ×	S	738309	184010	10	380 ml
	20-40 mm	S	738310	184020	10	380 ml
	25-40 mm	S	738311	184030	10	380 ml
	30-40 mm	S	738312	184040	10	380 ml

Klar	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	10-40 mm ×	S	738313	184050	10	380 ml



BodyFit Technology[®]

SenSura Mio är baserad på BodyFit Technology. Genom att ha den individuella kroppen i åtanke när vi designar, utvecklar vi lösningar som passar säkert till individuella kroppsformer och livsstilar.