

Elastisk  
basplatta


Unikt  
cirkelfilter

Hygieniskt  
utlopp

**SenSura<sup>®</sup> Mio**

# 1-dels Convex Flip sluten och tömbar påse

Det elastiska stomibandaget som följer kroppens former och rörelser

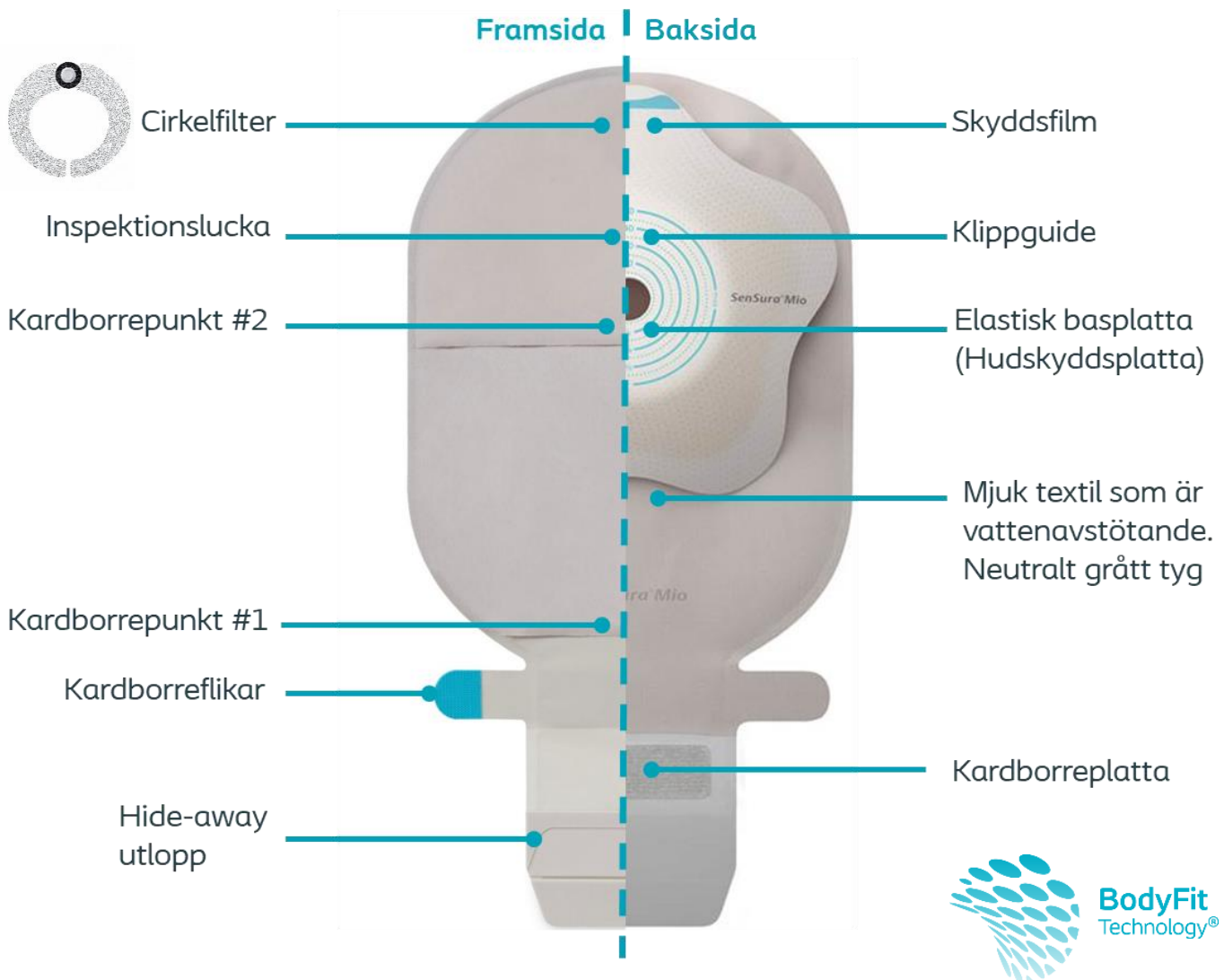

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com). Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

# Produktinformation

## Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage. SenSura® Mio 1-dels Convex Flip stomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med utbuktad peristomal kroppsprofil. Den slutna påsen är främst avsedd för kolostomi med fastare avföring och den tömbara påsen för ileostomi med tunnare avföring.

## Fördelar

- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar<sup>1</sup> och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Unikt cirkelfilter** – Det unika cirkelformade förfiltret minskar risken för att filtret täpps igen och tillåter ett jämnt flöde av tarmgaser att strömma igenom filtret. Det är kliniskt bevisat att cirkelfiltret minskar uppkomsten av luft i påsen (ballooning) med upp till 61%<sup>2</sup> och det tar 82%<sup>3</sup> längre tid innan filtret mättas jämfört med ett traditionellt stomibandage. Detta hjälper användaren att sova bättre på natten. Det unika cirkelfiltret är utformat för att rena tarmgaser och neutralisera lukt. Filtret på slutna påse är optimerat för kolostomi med fastare avföring och filtret på tömbar påse är optimerat för ileostomi med lösare avföring.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Inspektionslucka** – En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Smidigt och hygieniskt hide-away utlopp på tömbar påse** – Enkelt att tömma påsen och rengöra utloppets mynning utan kladd. Utloppet stängs med ett integrerat kardborrelås som är tät efter stängning. Utloppet kan vikas in och gömmas på framsidan för diskretion eller ökad komfort. Välj mellan två lägen: Kardborrepunkt #1 eller #2 (påsen halveras).
- **Artikelnummer på påsen** – Artikelnumret är tryckt längst upp på påsen under tyget där det står "Cirkelfilter 500" vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknads största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

2. Global Claiming Document number PM-14891

3. Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690)

## SenSura Mio 1-dels


Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage.



## SenSura Mio Convex Flip – en böjd, konkav basplatta för utbuktade områden

SenSura® Mio Convex Flip är det första stomibandaget på marknaden som är framtaget för utbuktningar och bråck. Är bevisat att ge bättre kontakt med huden och minska risken för läckage jämfört med platta basplattor.

Den unika kombinationen SenSura Mio Convex Flip och Brava Skyddande Tättningsring Convex ger tillsammans 99% kontakt med huden och skapar en tät och säker förslutning mellan basplattan och huden<sup>4</sup>.

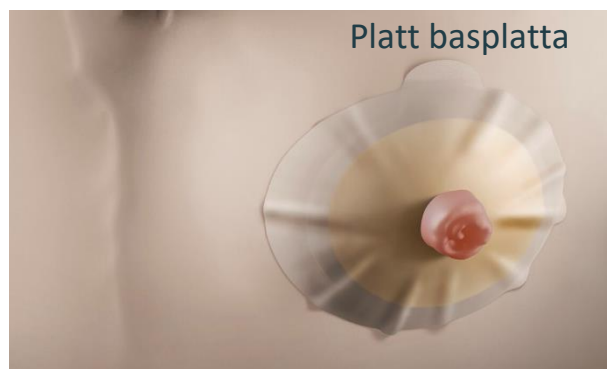

### Stjärnformad basplatta som sitter säkert över utbuktade områden



Flikarna på den stjärnformade, konkava basplattan formar sig efter utbuktningen utan att det skapas veck, rynkor eller kanaler i basplattan.

### Flexzoner för ökad komfort vid kroppsrörelser

Flexzonerna i basplattans yttre kanter är avfasade och följer kroppens rörelser. Flexzonerna i mitten av ringen ger flexibilitet närmast stomien.

### Inbyggd stabilitetsring stabiliserar mittzonen

Den inbyggda ringen stabiliserar mittzonen av basplattan och ger stomien det stöd som behövs.

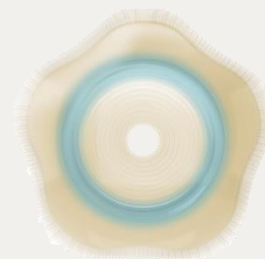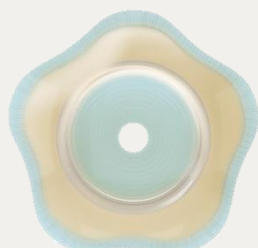


4. För användare med ett utbuktat peristomat område samt för stomier i hudplanet eller indragna stomier.

## Produktsortiment

### SenSura® Mio 1-dels sluten Convex Flip

#### Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunn
<b>Mini</b>	10-40 mm	63 ml	•		10	100	181000	738274
<b>Midi</b>	10-40 mm	327 ml	•		10	100	181010	738275
	10-50 mm	327 ml	•		10	100	181100	738277
	25-50 mm	327 ml	•		10	100	181110	738278
	30-50 mm	327 ml	•		10	100	181120	738279
	35-50 mm	327 ml	•		10	100	181130	738280
	<b>Maxi</b>	10-40 mm	455 ml	•		10	100	181020
10-50 mm		455 ml	•		10	100	181200	738281
25-50 mm		455 ml	•		10	100	181210	738282
30-50 mm		455 ml	•		10	100	181220	738283
35-50 mm		455 ml	•		10	100	181230	738284
10-60 mm		455 ml	•		10	100	181300	738285
40-60 mm		455 ml	•		10	100	181310	738286
45-60 mm		455 ml	•		10	100	181320	738287

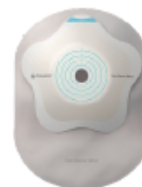

#### Klar

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunn
<b>Maxi</b>	10-60 mm	455 ml			10	100	181350	738288



## SenSura® Mio 1-dels tömbar Convex Flip

### Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteks- varunr
Mini	10–40 mm	60 ml	•		10	100	182000	738289
Midi	10–40 mm	342 ml	•		10	100	182010	738290
	10–50 mm	342 ml	•		10	100	182100	738293
	25–50 mm	342 ml	•		10	100	182120	738294
	30–50 mm	342 ml	•		10	100	182130	738295
	35–50 mm	342 ml	•		10	100	182140	738296
Maxi	10–40 mm	470 ml	•		10	100	182020	738291
	10–40 mm	470 ml			10	100	182030	738292
	10–50 mm	470 ml	•		10	100	182200	738297
	10–50 mm	470 ml			10	100	182240	738301
	10–60 mm	470 ml	•		10	100	182300	738302
	10–60 mm	470 ml			10	100	182320	738304
	25–50 mm	470 ml	•		10	100	182210	738298
	30–50 mm	470 ml	•		10	100	182220	738299
	35–50 mm	470 ml	•		10	100	182230	738300
	40–60 mm	470 ml	•		10	100	182310	738303



### Klar

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteks- varunr
Maxi	10–60 mm	470 ml			10	100	182350	738305



## Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 1-dels Convex Flip slutet och tömbar påse ska användas, se separat bruksanvisning på [coloplast.se](https://coloplast.se).

Bruksanvisning/IFU:



[coloplast.to/bruksanvisningar](https://coloplast.to/bruksanvisningar)

Instruktionsfilm:



[coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care](https://coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care)

## Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.  
Undvik direkt solljus.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

## Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](https://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).