

Elastisk
basplatta


Fler-
kammars
påse

Mjukt
utlopp

SenSura[®]Mio

1-dels Convex urostomipåse

Det elastiska stomibandaget som följer kroppens former och rörelser

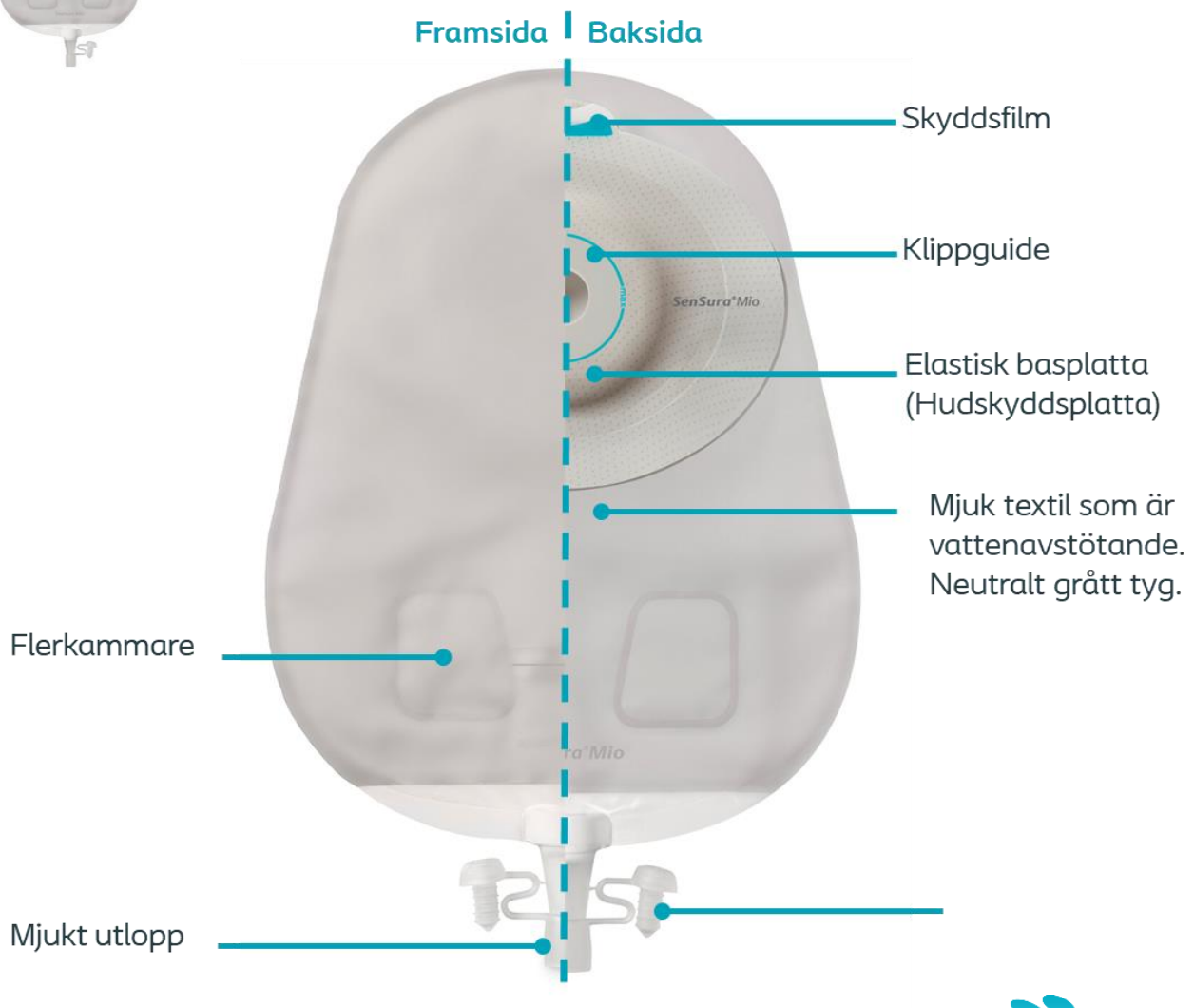

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla urin. Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage. SenSura® Mio 1-dels Convex urostomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med inbuktad kroppsprofil och stomier som behöver stöd eller hjälp att skjutas fram.

Fördelar

- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar¹ och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Backventil** – förhindrar urinen från att rinna tillbaka in mot stomin.
- **Mjukt utlopp** – utloppet är lätt att använda och kan gömmas undan när det inte används. Detta förhindrar att det skaver mot benet eller ljumsken, vilket ger bättre komfort och diskretion.
- **Utloppspluggen fjädrar tillbaka** efter öppning och är inte i vägen vid tömning.
- **Flerkammarpåse** – påsen är uppdelad i kammare som sprider urinen jämnt i påsen. Detta ger en platt, diskret profil och minskar skvalpande ljud.
- **Kan kopplas direkt till Coloplast Uro Sängpåse** (artnr 213650) – Utloppet på urostomipåsen kan kopplas direkt till sängpåsen utan att använda adaptor. Använd dock medföljande adaptor för att koppla ihop med urin-uppsamlingspåse från annan tillverkare.
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt längst upp på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava fyrpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av höglödespåsar och postoperativa bandage.

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

SenSura Mio 1-dels

Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage.



SenSura Mio Convex - En unik kombination av flexibilitet och stabilitet

SenSura Mio Convex finns i tre varianter av konvexitet för att möta olika behov. De ger en avsevärt bättre passform och kliniska studier har visat på minskad förekomst av läckage jämfört med platta stomibandage.^{4,5}

SenSura Mio Convex Soft (6 mm)



För stomier med stomimynningen **över hudplanet**, som **behöver lite stöd** vid t ex rynkor eller veck i området runt stomin.

SenSura Mio Convex Light (6 mm)



För stomier med stomimynningen i **nivå med hudplanet**, som behöver **lätt hjälp** med att skjutas fram.

SenSura Mio Convex Deep (9 mm)



För stomier med stomimynningen **under hudplanet**, som behöver **mycket hjälp** med att skjutas fram.

Två unika egenskaper för SenSura Mio Convex som säkerställer en unik kombination av flexibilitet och stabilitet

BodyFit Technology är den patenterade tekniken bakom den unika elastiska häftan i SenSura Mio. Den följer kroppens rörelser samtidigt som den sitter säkert mot huden.

De integrerade flexlinjerna är utformade för att ge större flexibilitet utan att kompromissa med stabiliteten. Resultatet är en bekväm och säker passform. Flexlinjemönstret minskar tjockleken på materialet och säkerställer att basplattan böjer sig runt stomin utan att klämma ihop den.

SenSura Mio Convex Deep är dubbelt så flexibel som en traditionell Convex Light⁶



4. Walker H, Hopkins G, Waller M, Stirling Z. Raising the bar: New flexible convex stoma appliance - a randomized controlled trial. WCET. 2016;36(1):S6-S11.
5. Kruse, M. T et al, Considering the benefits of a new stoma appliance: a clinical trial, British Journal of Nursing, Nov 2015 (Stoma Supplement), Vol 24, No 22
6. Coloplast, Verification Report, Bendability of convex shells and baseplates, 2017.

Produktsortiment

SenSura® Mio 1-dels Uro Convex Soft

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	10–33 mm	340 ml	•	10	100	168010	735634
Maxi	10–33 mm	490 ml	•	10	100	168050	735635
	10–50 mm	440 ml	•	10	100	136780	730700
	25–33 mm	440 ml	•	10	100	136800	730701



Klar*

	Hålstorlek	Volym	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Maxi	10–50 mm	490 ml	•	10	100	168100	735636

* Utan döljbart utlopp



SenSura® Mio 1-dels Uro Convex Light

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	10–23 mm	340 ml	•	10	100	168210	735640
	15–33 mm	340 ml	•	10	100	168220	735641
	31–43 mm	340 ml	•	10	100	168230	735642
Maxi	10–23 mm	490 ml	•	10	100	168250	735643
	15–33 mm	490 ml	•	10	100	168260	735644
	18–23 mm	490 ml	•	10	100	168300	735645
	21–23 mm	490 ml	•	10	100	168310	735646
	25–33 mm	490 ml	•	10	100	168320	735647
	28–33 mm	490 ml	•	10	100	168330	735648
	31–43 mm	490 ml	•	10	100	168270	735649



Klar*

	Hålstorlek	Volym	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Maxi	10–23 mm	490 ml	•	10	100	168350	735650
	10–43 mm	490 ml	•	10	100	168370	735651
	15–33 mm	490 ml	•	10	100	168360	735652

* Utan döljbart utlopp



SenSura® Mio 1-dels Uro Convex Deep

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	10–23 mm	340 ml	•	10	100	168510	735653
	15–33 mm	340 ml	•	10	100	168520	735654
	31–43 mm	340 ml	•	10	100	168530	735655
Maxi	10–23 mm	490 ml	•	10	100	168550	735656
	15–33 mm	490 ml	•	10	100	168560	735657
	18–23 mm	490 ml	•	10	100	168600	735658
	21–23 mm	490 ml	•	10	100	168610	735659
	25–33 mm	490 ml	•	10	100	168620	735660
	28–33 mm	490 ml	•	10	100	168630	735661
	31–43 mm	490 ml	•	10	100	168570	735662



Klar*

	Hålstorlek	Volym	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Maxi	10–23 mm	490 ml	•	10	100	168650	735663
	15–33 mm	490 ml	•	10	100	168660	735665
	10–43 mm	490 ml	•	10	100	168670	735664

* Utan döljbart utlopp



Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 1-dels Convex urostomipåse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Instruktionsfilm:



coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.