

Elastisk
basplatta


Unikt
cirkelfilter

Hygieniskt
utlopp

SenSura[®]Mio

1-dels Platt sluten och tömbar påse

Det elastiska stomibandaget som följer kroppens former och rörelser

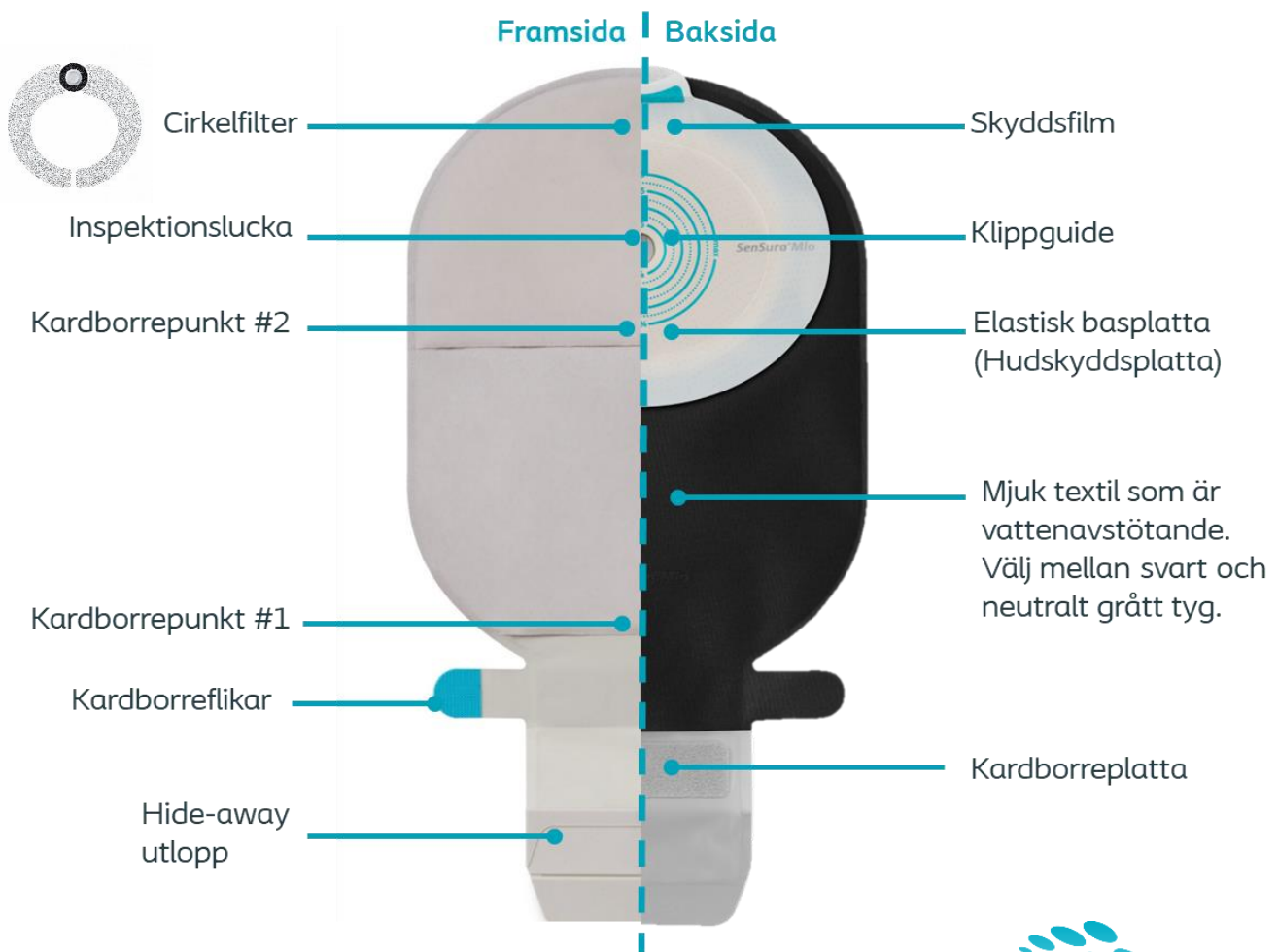

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage. SenSura® Mio 1-dels Platt stomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med platt peristomal kroppsprofil. Den slutna påsen är främst avsedd för kolostomi med fastare avföring och den tömbara påsen för ileostomi med tunnare avföring.

Fördelar

- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar¹ och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Basplatta upp till 100 mm** - Välj en större basplatta för stora stomier, loopstomier och prolaps. Bra postoperativt alternativ och övergångspåse vid mer svulstiga stomier. Maxi XL/ Maxi XXL påse.
- **Unikt cirkelfilter** – Det unika cirkelformade förfiltret minskar risken för att filtret täpps igen och tillåter ett jämnt flöde av tarmgaser att strömma igenom filtret. Det är kliniskt bevisat att cirkelfiltret minskar uppkomsten av luft i påsen (ballooning) med upp till 61%² och det tar 82%³ längre tid innan filtret mättas jämfört med ett traditionellt stomibandage. Detta hjälper användaren att sova bättre på natten. Det unika cirkelfiltret är utformat för att rena tarmgaser och neutralisera lukt. Filtret på slutna påse är optimerat för kolostomi med fastare avföring och filtret på tömbar påse är optimerat för ileostomi med lösare avföring.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch& bad.
- **Två färger för att erbjuda valmöjlighet** - Användare vill kunna välja mellan olika färger utifrån tex livsstil, aktivitet, färg på kläderna/ underkläderna. Välj mellan neutralt grått och svart tyg. Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna- inte ens under vita. En svart påse är mer diskret till mörka kläder/ underkläder och drar inte till sig lika mycket uppmärksamhet vid tillfällen där påsen är synlig, tex på stranden, vid träning eller vid intima stunder.
- **Inspektionslucka** – En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Smidigt och hygieniskt hide-away utlopp på tömbar påse** – Enkelt att tömma påsen och rengöra utloppets mynning utan kladd. Utloppet stängs med ett integrerat kardborrelås som är tät efter stängning. Utloppet kan vikas in och gömmas på framsidan för diskretion eller ökad komfort. Välj mellan två lägen: Kardborrepunkt #1 eller #2 (påsen halveras).
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt längst upp på påsen under tyget där det står "Cirkelfilter 500" vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av höglödespåsar och postoperativa bandage.

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

2. Global Claiming Document number PM-14891

3. Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690)

SenSura Mio 1-dels

Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage.



SenSura Mio – Ett platt bandage som följer kroppens rörelser

SenSura Mio minskar förekomsten av läckage jämfört med andra varumärken⁴. Den elastiska basplattan följer kroppens rörelser när den böjs eller sträcks samtidigt som den sitter säkert mot huden. Basplattan är dubbelt så töjbar och ger en bättre passform jämfört med ett traditionellt stomibandage.



⁴Laboratorierapporter, läckagetester, Coloplast data-on-file VV-0283269, VV-0294078 och VV-0350528

Produktsortiment

SenSura® Mio 1-dels sluten

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunr
Mini	15-45 mm	100 ml	•		30	360	106700	734441
Midi	15-45 mm	340 ml	•		30	360	106710	734442
	25-45 mm	340 ml	•		30	360	106720	734443
	30-45 mm	340 ml	•		30	360	106730	734444
	35-45 mm	340 ml	•		30	360	106740	734445
Maxi	15-45 mm	550 ml	•		30	360	106810	734446
	30-45 mm	550 ml	•		30	360	106830	734447
	35-45 mm	550 ml	•		30	360	106840	734448
	40-55 mm	550 ml	•		30	360	106850	734449
Maxi XL	10-70 mm	580 ml	•		30	180	183700	*
Maxi XXL	10-100 mm	820 ml	•		30	120	183720	*

* Beställ via coloplast kundservice 0300-33256.

Klar

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunr
Maxi	15-55 mm	550 ml			30	360	106910	734450



SenSura® Mio 1-dels tömbar

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunr
Mini	10–45 mm	220 ml	•		30	360	104010	734460
	10–45 mm	220 ml			30	360	104060	734469
Midi	10–45 mm	420 ml	•		30	360	104110	734461
	10–45 mm	420 ml			30	360	104160	734470
	25–45 mm	420 ml	•		30	360	104120	734462
	30–45 mm	420 ml	•		30	360	104130	734463
	35–45 mm	420 ml	•		30	360	104140	734464
Maxi	10–55 mm	650 ml	•		30	360	104210	734465
	10–55 mm	650 ml			30	360	104260	734471
	30–45 mm	650 ml	•		30	360	104220	734466
	35–45 mm	650 ml	•		30	360	104230	734467
	40–45 mm	650 ml	•		30	360	104240	734468
Maxi XL	10–70 mm	520 ml	•		30	180	183750	*
Maxi XXL	10–100 mm	790 ml	•		30	120	183770	*

* Beställ via coloplast kundservice 0300-33256.



Klar

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunr
Maxi	10–55 mm	650 ml			30	360	104280	734472



SenSura® Mio 1-dels tömbar

Svart

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunr
Mini	10–45 mm	220 ml	•		30	360	187700	-
Midi	10–45 mm	420 ml	•		30	360	187710	-
Maxi	10–55 mm	650 ml	•		30	360	187720	-
	30–45 mm	650 ml	•		30	360	187730	-
	35–45 mm	650 ml	•		30	360	187740	-
	40–45 mm	650 ml	•		30	360	187750	-



Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 1-dels Platt sluten och tömbar påse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Instruktionsfilm:



coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.