

Elastisk
basplatta


Fler-
kammars
påse

Mjukt
utlopp

SenSura[®]Mio

2-dels Click Platt urostomipåse

Det elastiska stomibandaget som följer kroppens former och rörelser

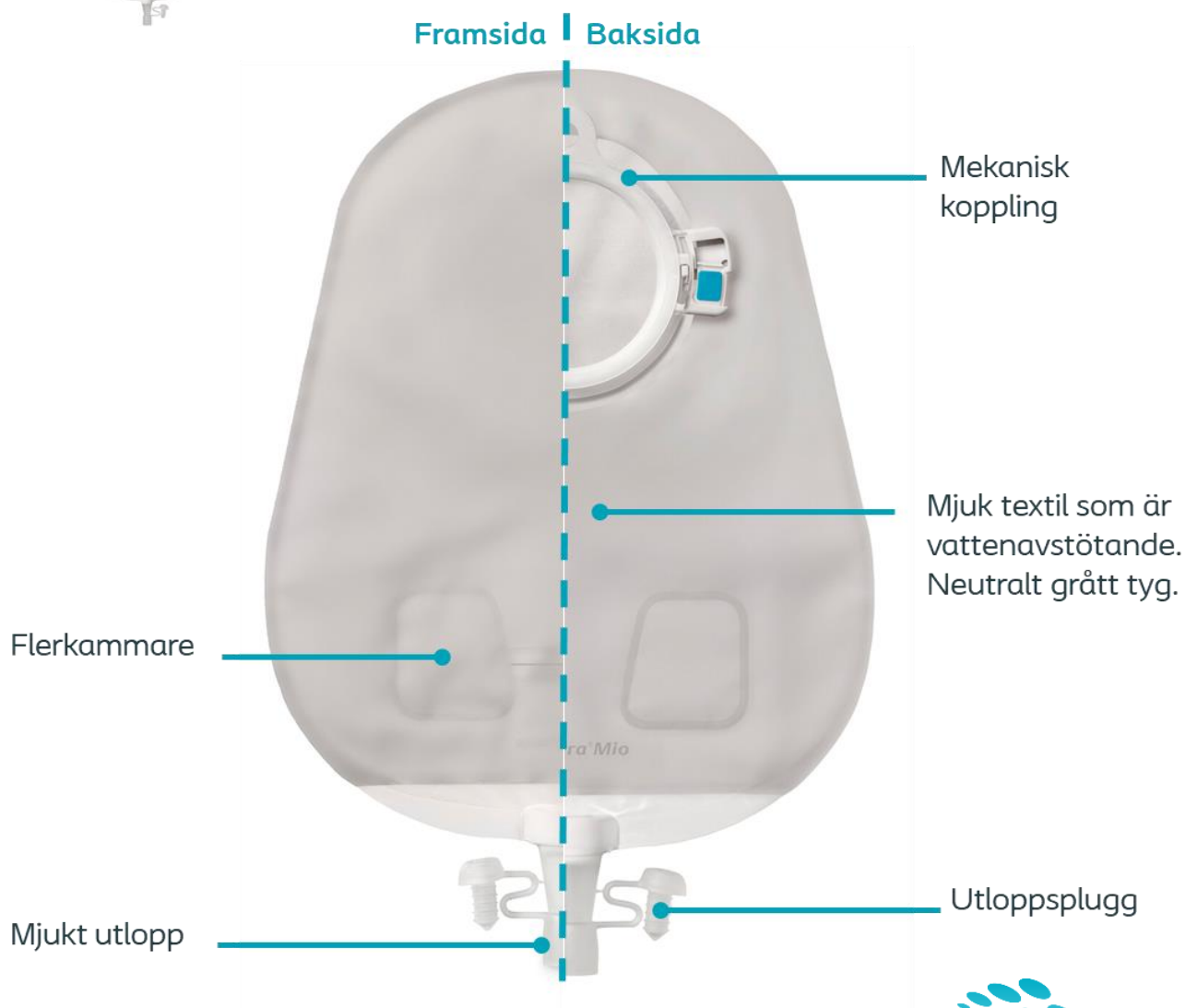

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla urin. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® Mio 2-dels Click Platt urostomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med platt peristomal kroppsprofil.

Fördelar

- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar¹ och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Backventil** – förhindrar urinen från att rinna tillbaka in mot stomin.
- **Mjukt utlopp** – utloppet är lätt att använda och kan gömmas undan när det inte används. Detta förhindrar att det skaver mot benet eller ljumsken, vilket ger bättre komfort och diskretion.
- **Utloppspluggen fjädrar tillbaka** efter öppning och är inte i vägen vid tömning.
- **Flerkammarpåse** – påsen är uppdelad i kammare som sprider urinen jämnt i påsen. Detta ger en platt, diskret profil och minskar skvalpande ljud.
- **Kan kopplas direkt till Coloplast Uro Sängpåse** (artnr 213650) – Utloppet på urostomipåsen kan kopplas direkt till sängpåsen utan att använda adaptor. Använd dock medföljande adaptor för att koppla ihop med urin-uppsamlingspåse från annan tillverkare.
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt längst upp på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava fyrpunktsbälte för att hålla den konkava basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av höglödespåsar och postoperativa bandage.

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

SenSura Mio 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura Mio 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.

- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan.



SenSura Mio – Ett platt bandage som följer kroppens rörelser

SenSura Mio minskar förekomsten av läckage jämfört med andra varumärken⁴. Den elastiska basplattan följer kroppens rörelser när den böjs eller sträcks samtidigt som den sitter säkert mot huden. Basplattan är dubbelt så tålig och ger en bättre passform jämfört med ett traditionellt stomibandage.



4.Laboratorierporter, läckagetester, Coloplast data-on-file VV-0283269, VV-0294078 och VV-0350528

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care


Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



Produktsortiment

SenSura® Mio 2-dels Click basplatta

Ringstorlek	Hälstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	10-35 mm		5	210	105010	734486
40 mm	10-35 mm	•	5	210	105020	734487
40 mm	20-35 mm	•	5	210	105030	734488
40 mm	25-35 mm	•	5	210	105040	734489
40 mm	28-35 mm	•	5	210	105050	734490
50 mm	10-45 mm		5	210	105110	734491
50 mm	10-45 mm	•	5	210	105120	734492
50 mm	30-45 mm	•	5	210	105130	734493
50 mm	32-45 mm	•	5	210	105140	734494
50 mm	35-45 mm	•	5	210	105150	734495
60 mm	10-55 mm		5	210	105210	743396
60 mm	10-55 mm	•	5	210	105220	734497
60 mm	40-55 mm	•	5	210	105230	734498
60 mm	45-55 mm	•	5	210	105240	734499
60 mm	50-55 mm	•	5	210	105250	734500

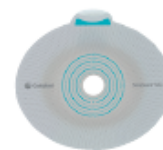

SenSura® Mio 2-dels Click Uro

Neutralt grå

	Ringstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	50 mm	380 ml	30	240	114960	734542
Maxi	40 mm	550 ml	30	240	114910	734540
	50 mm	480 ml	30	240	114970	734543
	60 mm	480 ml	30	240	114990	738072



Klar

	Ringstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
Maxi	40 mm	550 ml	30	240	114920	734541
	50 mm	480 ml	30	240	114980	734544

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 2-dels Click Platt urostomipåse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Instruktionsfilm:



coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.