

Elastisk
basplatta


Unikt
cirkelfilter

Hygieniskt
utlopp

SenSura[®]Mio

2-dels Click Platt sluten och tömbar påse

Det elastiska stomibandaget som följer kroppens former och rörelser

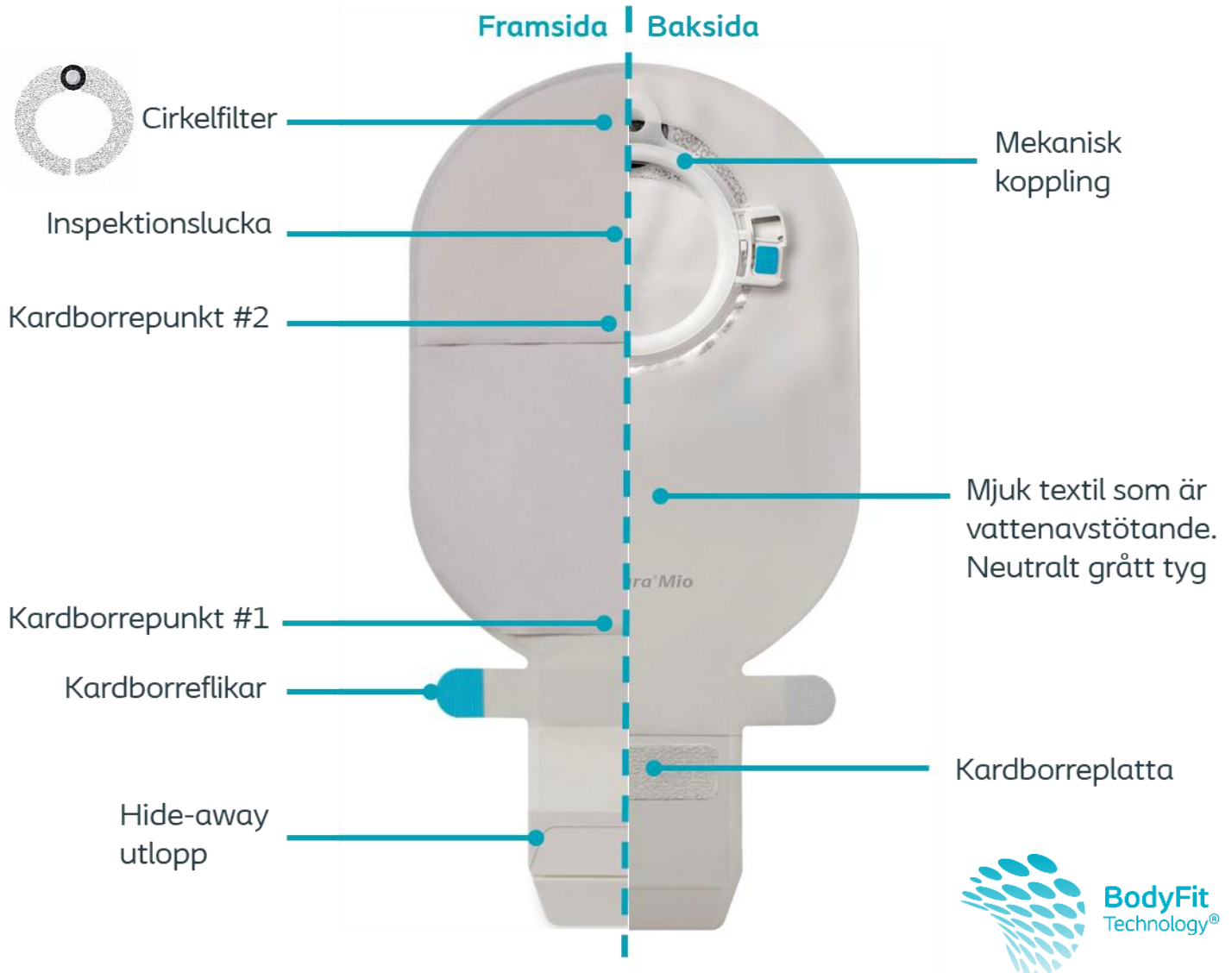

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® Mio 2-dels Click Platt stomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med platt peristomal kroppsprofil. Den slutna påsen är främst avsedd för kolostomi med fastare avföring och den tömbara påsen för ileostomi med tunnare avföring.

Fördelar

- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar¹ och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Unikt cirkelfilter** – Det unika cirkelformade förfiltret minskar risken för att filtret täpps igen och tillåter ett jämnt flöde av tarmgaser att strömma igenom filtret. Det är kliniskt bevisat att cirkelfiltret minskar uppkomsten av luft i påsen (ballooning) med upp till 61%² och det tar 82%³ längre tid innan filtret mättas jämfört med ett traditionellt stomibandage. Detta hjälper användaren att sova bättre på natten. Det unika cirkelfiltret är utformat för att rena tarmgaser och neutralisera lukt. Filtret på slutna påse är optimerat för kolostomi med fastare avföring och filtret på tömbar påse är optimerat för ileostomi med lösare avföring.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Inspektionslucka** – En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Smidigt och hygieniskt hide-away utlopp på tömbar påse** – Enkelt att tömma påsen och rengöra utloppets mynning utan kladd. Utloppet stängs med ett integrerat kardborrelås som är tät efter stängning. Utloppet kan vikas in och gömmas på framsidan för diskretion eller ökad komfort. Välj mellan två lägen: Kardborrepunkt #1 eller #2 (påsen halveras).
- **Artikelnummer på påsen** – Artikelnumret är tryckt längst upp på påsen under tyget där det står "Cirkelfilter 500" vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava fyrpunktsbälte för att hålla den konkava basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

2. Global Claiming Document number PM-14891

3. Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690)

SenSura Mio 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura Mio 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.

- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan.



SenSura Mio – Ett platt bandage som följer kroppens rörelser

SenSura Mio minskar förekomsten av läckage jämfört med andra varumärken⁴. Den elastiska basplattan följer kroppens rörelser när den böjs eller sträcks samtidigt som den sitter säkert mot huden. Basplattan är dubbelt så tålig och ger en bättre passform jämfört med ett traditionellt stomibandage.




⁴Laboratorierpporter, läckagetester, Coloplast data-on-file VV-0283269, VV-0294078 och VV-0350528

Produktsortiment

SenSura® Mio 2-dels Click basplatta

Ringstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp:	Antal/TFP:	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	10-35 mm		5	210	105010	734486
40 mm	10-35 mm	•	5	210	105020	734487
40 mm	20-35 mm	•	5	210	105030	734488
40 mm	25-35 mm	•	5	210	105040	734489
40 mm	28-35 mm	•	5	210	105050	734490
50 mm	10-45 mm		5	210	105110	734491
50 mm	10-45 mm	•	5	210	105120	734492
50 mm	30-45 mm	•	5	210	105130	734493
50 mm	32-45 mm	•	5	210	105140	734494
50 mm	35-45 mm	•	5	210	105150	734495
60 mm	10-55 mm		5	210	105210	734496
60 mm	10-55 mm	•	5	210	105220	734497
60 mm	40-55 mm	•	5	210	105230	734498
60 mm	45-55 mm	•	5	210	105240	734499
60 mm	50-55 mm	•	5	210	105250	734500
70 mm	10-65 mm	•	5	140	105310	734501

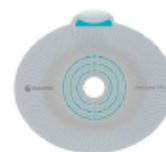

SenSura® Mio 2-dels Click sluten

Neutralt grå

	Ringstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Antal/fp	Antal/tpf	Artikelnr	Apoteks-varunr
Mini	50 mm	100 ml	•	30	240	112110	734504
Midi	40 mm	340 ml	•	30	240	112010	734502
	50 mm	340 ml	•	30	240	112120	734505
	60 mm	340 ml	•	30	240	112210	734507
Maxi	40 mm	550 ml	•	30	240	112020	734503
	50 mm	550 ml	•	30	240	112130	734506
	60 mm	550 ml	•	30	240	112220	734508
	70 mm	490 ml	•	30	240	112250	734509



SenSura® Mio 2-dels Click tömbar

Neutralt grå

	Ringstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Antal/fp	Antal/tpf	Artikelnr	Apoteks-varunr
Mini	50 mm	200 ml	•	30	240	112410	734524
Midi	40 mm	420 ml	•	30	240	112310	734520
	50 mm	420 ml	•	30	240	112420	734525
	60 mm	420 ml	•	30	240	112510	734527
Maxi	40 mm	650 ml	•	30	240	112320	734521
	40 mm	650 ml		30	240	112340	734523
	50 mm	650 ml	•	30	240	112430	734526
	50 mm	650 ml		30	240	112450	735160
	60 mm	650 ml	•	30	240	112520	734528
	60 mm	650 ml		30	240	112540	734530
	70 mm	510 ml	•	30	240	112610	734531
	70 mm	510 ml		30	240	112630	734533



Klar

	Ringstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Antal/fp	Antal/tpf	Artikelnr	Apoteks-varunr
Maxi	40 mm	650 ml		30	240	112330	734522
	60 mm	650 ml		30	240	112530	734529
	70 mm	510 ml		30	240	112620	734532

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 2-dels Click Platt slutet och tömbar påse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Instruktionsfilm:



coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.