

Elastisk
basplatta


Unikt
cirkelfilter

Hygieniskt
utlopp

SenSura[®]Mio

2-dels Flex Convex sluten & tömbar påse

Det elastiska stomibandaget som följer kroppens former och rörelser

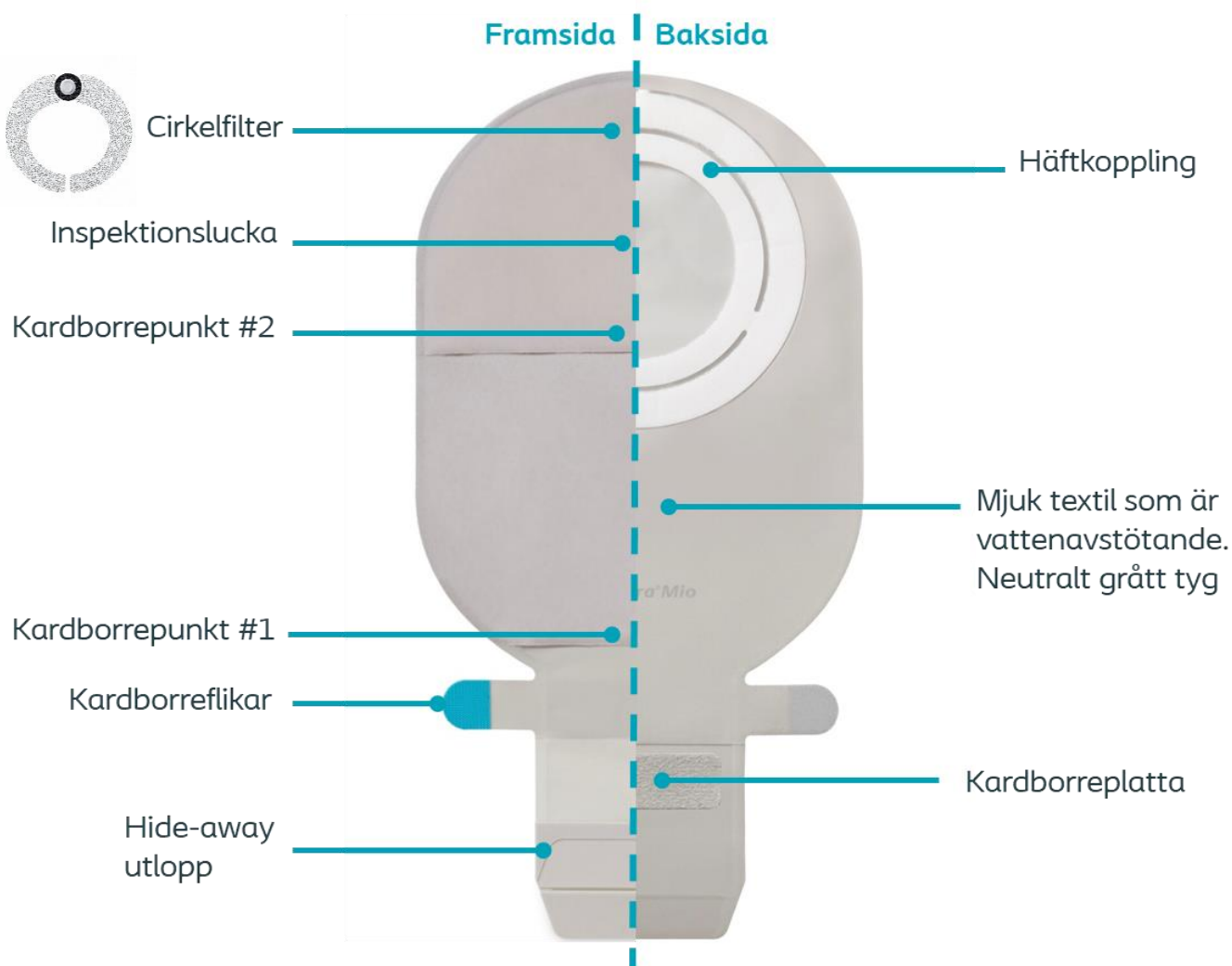

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® Mio 2-dels Flex Convex stomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med inbuktad kroppsprofil och stomier som behöver stöd eller hjälp att skjutas fram. Den slutna påsen är främst avsedd för kolostomi med fastare avföring och den tömbara påsen för ileostomi med tunnare avföring.

Fördelar

- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar¹ och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Unikt cirkelfilter** – Det unika cirkelformade förfiltret minskar risken för att filtret täpps igen och tillåter ett jämnt flöde av tarmgaser att strömma igenom filtret. Det är kliniskt bevisat att cirkelfiltret minskar uppkomsten av luft i påsen (ballooning) med upp till 61%² och det tar 82%³ längre tid innan filtret mättas jämfört med ett traditionellt stomibandage. Detta hjälper användaren att sova bättre på natten. Det unika cirkelfiltret är utformat för att rena tarmgaser och neutralisera lukt. Filtret på slutna påse är optimerat för kolostomi med fastare avföring och filtret på tömbar påse är optimerat för ileostomi med lösare avföring.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Inspektionslucka** – En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Smidigt och hygieniskt hide-away utlopp på tömbar påse** – Enkelt att tömma påsen och rengöra utloppets mynning utan kladd. Utloppet stängs med ett integrerat kardborrelås som är tät efter stängning. Utloppet kan vikas in och gömmas på framsidan för diskretion eller ökad komfort. Välj mellan två lägen: Kardborrepunkt #1 eller #2 (påsen halveras).
- **Artikelnummer på påsen** – Artikelnumret är tryckt längst upp på påsen under tyget där det står "Cirkelfilter 500". Förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Konvexitetssymbol på basplattan** – Symbolen för Convex Light är tryckt på basplattan vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava fyrpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)


2. Global Claiming Document number PM-14891

3. Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690)

SenSura Mio 2-dels Flex - häftkoppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura Mio 2-dels Flex är en häftkoppling som är bekväm att använda och följer kroppens rörelser.

- ✓ **Lätt att applicera** - Häftkoppling appliceras med ett lätt tryck mot magen. Perfekt för nyopererade patienter, på känsliga områden och på mjuka magar. Även om påsen går att lossa från plattan och fästa igen är vidhäftningen stark och sitter säkert. Häftkopplingen är bred för att underlätta placeringen och den turkosa markeringen på häftan vägleder vid applikation.
- ✓ **Diskret** - Kopplingens låga profil gör att den är nästan lika platt som ett 1-delsbandage och syns mindre under kläderna
- ✓ SenSura[®] Mio Flex och SenSura[®] Flex är kompatibla

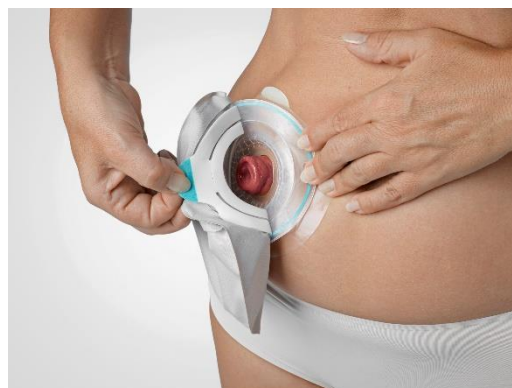

SenSura Mio Convex - En unik kombination av flexibilitet och stabilitet

SenSura Mio Convex ger en avsevärt bättre passform och kliniska studier har visat på minskad förekomst av läckage jämfört med platta stomibandage.^{4,5}

SenSura Mio Convex Light (6 mm)



För stomier med stomimynningen i **nivå med hudplanet**, som behöver **lätt hjälp** med att skjutas fram.

Två unika egenskaper för SenSura Mio Convex som säkerställer en unik kombination av flexibilitet och stabilitet

BodyFit Technology är den patenterade tekniken bakom den unika elastiska häftan i SenSura Mio. Den följer kroppens rörelser samtidigt som den sitter säkert mot huden.

De integrerade flexlinjerna är utformade för att ge större flexibilitet utan att kompromissa med stabiliteten. Resultatet är en bekväm och säker passform. Flexlinjemönstret minskar tjockleken på materialet och säkerställer att basplattan böjer sig runt stomin utan att klämma ihop den.



4. Walker H, Hopkins G, Waller M, Stirling Z. Raising the bar: New flexible convex stoma appliance - a randomized controlled trial. WCET. 2016;36(1):S6-S11.
5. Kruse, M. T et al, Considering the benefits of a new stoma appliance: a clinical trial, British Journal of Nursing, Nov 2015 (Stoma Supplement), Vol 24, No 22

Produktsortiment

SenSura® Mio 2-dels Flex Convex Light basplatta

Kragstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
35 mm	10-20 mm	•	5	140	164710	735564
35 mm	18-20 mm	•	5	140	164720	735566
50 mm	15-30 mm	•	5	140	164810	735570
50 mm	15-40 mm	•	5	140	164830	735574
50 mm	21-30 mm	•	5	140	164840	735571
50 mm	25-30 mm	•	5	140	164850	735573
50 mm	28-30 mm	•	5	140	164860	735568
50 mm	31-40 mm	•	5	140	164870	735572
50 mm	35-40 mm	•	5	140	164880	735565
70 mm	15-53 mm	•	5	100	164910	735567
70 mm	38-53 mm	•	5	100	164930	735569
70 mm	41-53 mm	•	5	100	164940	735575



SenSura® Mio 2-dels Flex sluten

Neutralt grå

	Kragstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunr
Mini	50 mm	130 ml	•	30	360	119110	734557
Midi	35 mm	340 ml	•	30	360	119010	734554
	50 mm	340 ml	•	30	360	119120	734558
	70 mm	340 ml	•	30	360	119210	734561
Maxi	35 mm	450 ml	•	30	360	119020	734555
	50 mm	450 ml	•	30	360	119130	734559
	70 mm	450 ml	•	30	360	119220	734562
Maxi XXL	90 mm	820 ml	•	30	120	183850	*



Klar

	Kragstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunr
Maxi	35 mm	450 ml		30	360	119030	734556
	50 mm	450 ml		30	360	119140	734560
	70 mm	450 ml		30	360	119230	734563

* Beställ via coloplast kundservice 0300-33256.

SenSura® Mio 2-dels Flex tömbar

Neutralt grå

	Kragstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunr
Mini	50 mm	180 ml	•	30	360	119610	734568
Midi	35 mm	260 ml	•	30	360	119510	734564
	50 mm	260 ml	•	30	360	119620	734569
	70 mm	260 ml	•	30	360	119710	734573
Maxi	35 mm	410 ml	•	30	360	119520	734565
	35 mm	410 ml		30	360	119540	734567
	50 mm	410 ml	•	30	360	119630	734570
	50 mm	410 ml		30	360	119650	734572
	70 mm	410 ml	•	30	360	119720	734574
	70 mm	410 ml		30	360	119740	734576
Maxi XXL	90 mm	800 ml	•	30	120	183870	*



Klar

	Kragstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunr
Maxi	35 mm	410 ml		30	360	119530	734566
	50 mm	410 ml		30	360	119640	734571
	70 mm	410 ml		30	360	119730	734575

* Beställ via coloplast kundservice 0300-33256.

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 2-dels Flex Convex slutet och tömbar påse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Instruktionsfilm:



coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.