

Elastisk  
basplatta


kammar  
påse

Mjukt  
utlopp

**SenSura<sup>®</sup>Mio**

## 2-dels Flex Platt urostomipåse

Det elastiska stomibandaget som följer kroppens former och rörelser

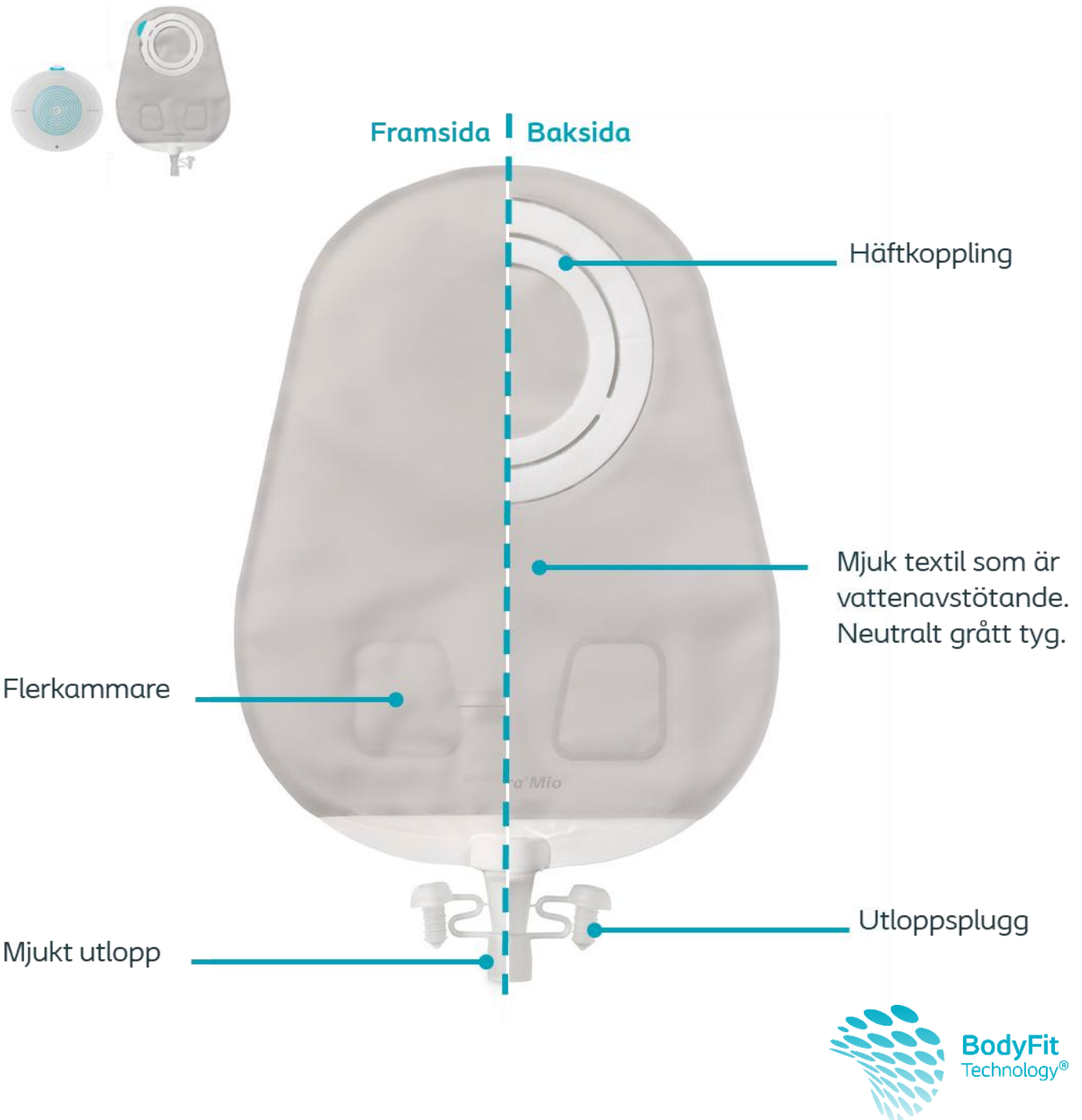

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com). Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

**Coloplast**

# Produktinformation

## Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla urin. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® Mio 2-dels Flex Platt urostomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med platt peristomal kroppsprofil.

## Fördelar


- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar<sup>1</sup> och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Backventil** – förhindrar urinen från att rinna tillbaka in mot stomin.
- **Mjukt utlopp** – utloppet är lätt att använda och kan gömmas undan när det inte används. Detta förhindrar att det skaver mot benet eller ljumsken, vilket ger bättre komfort och diskretion.
- **Utloppspluggen fjädrar tillbaka** efter öppning och är inte i vägen vid tömning.
- **Flerkammarpåse** – påsen är uppdelad i kammare som sprider urinen jämnt i påsen. Detta ger en platt, diskret profil och minskar skvalpande ljud.
- **Kan kopplas direkt till Coloplast Uro Sängpåse** (artnr 213650) – Utloppet på urostomipåsen kan kopplas direkt till sängpåsen utan att använda adaptor. Använd dock medföljande adaptor för att koppla ihop med urin-uppsamlingspåse från annan tillverkare.
- **Artikelnummer på påsen** – Artikelnumret är tryckt längst upp på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

## SenSura Mio 2-dels Flex - häftkoppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura Mio 2-dels Flex är en häftkoppling som är bekväm att använda och följer kroppens rörelser.

- ✓ **Lätt att applicera** - Häftkoppling appliceras med ett lätt tryck mot magen. Perfekt för nyopererade patienter, på känsliga områden och på mjuka magar. Även om påsen går att lossa från plattan och fästa igen är vidhäftningen stark och sitter säkert. Häftkopplingen är bred för att underlätta placeringen och den turkosa markeringen på häftan vägleder vid applikation.
- ✓ **Diskret** - Kopplingens låga profil gör att den är nästan lika platt som ett 1-delsbandage och syns mindre under kläderna
- ✓ SenSura® Mio Flex och SenSura® Flex är kompatibla

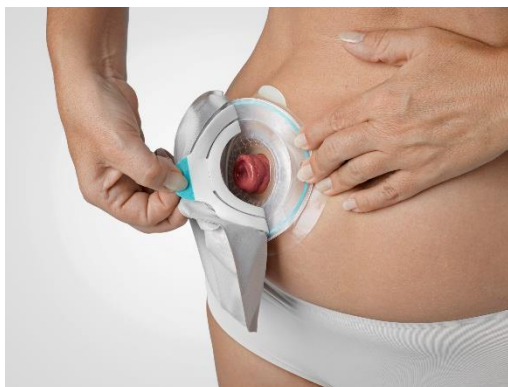

## SenSura Mio – Ett platt bandage som följer kroppens rörelser

SenSura Mio minskar förekomsten av läckage jämfört med andra varumärken<sup>4</sup>. Den elastiska basplattan följer kroppens rörelser när den böjs eller sträcks samtidigt som den sitter säkert mot huden. Basplattan är dubbelt så töjbar och ger en bättre passform jämfört med ett traditionellt stomibandage.




<sup>4</sup>Laboratorierpporter, läckagetester, Coloplast data-on-file VV-0283269, VV-0294078 och VV-0350528

## Produktsortiment

### SenSura® Mio 2-dels Flex basplatta

Kragstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
35 mm	10–33 mm		10	420	105510	734545
50 mm	10–48 mm		10	420	105610	734546
50 mm	25–48 mm		10	420	105620	734547
50 mm	30–48 mm		10	420	105630	734548
50 mm	35–48 mm		10	420	105640	734549
50 mm	40–48 mm		10	420	105650	734550

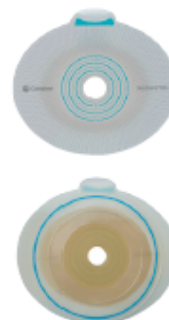

### SenSura® Mio 2-dels Flex Uro

#### Neutralt grå

	Kragstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	50 mm	310 ml	30	240	122960	734579
Maxi	35 mm	450 ml	30	240	122910	734577
	50 mm	410 ml	30	240	122970	734580



#### Klar

	Kragstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
Maxi	35 mm	450 ml	30	240	122920	734578
	50 mm	410 ml	30	240	122980	734581

## Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 2-dels Flex Platt urostomipåse ska användas, se separat bruksanvisning på [coloplast.se](https://coloplast.se).

Bruksanvisning/IFU:



[coloplast.to/bruksanvisningar](https://coloplast.to/bruksanvisningar)

Instruktionsfilm:



[coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care](https://coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care)

## Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.  
Undvik direkt solljus.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

## Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](https://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).