

Unik  
2-lagers  
häfta

Dubbla  
förfilter

Hygieniskt  
utlopp


**SenSura**<sup>®</sup>

# 1-dels Convex sluten och tömbar påse

Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd



## Baksida

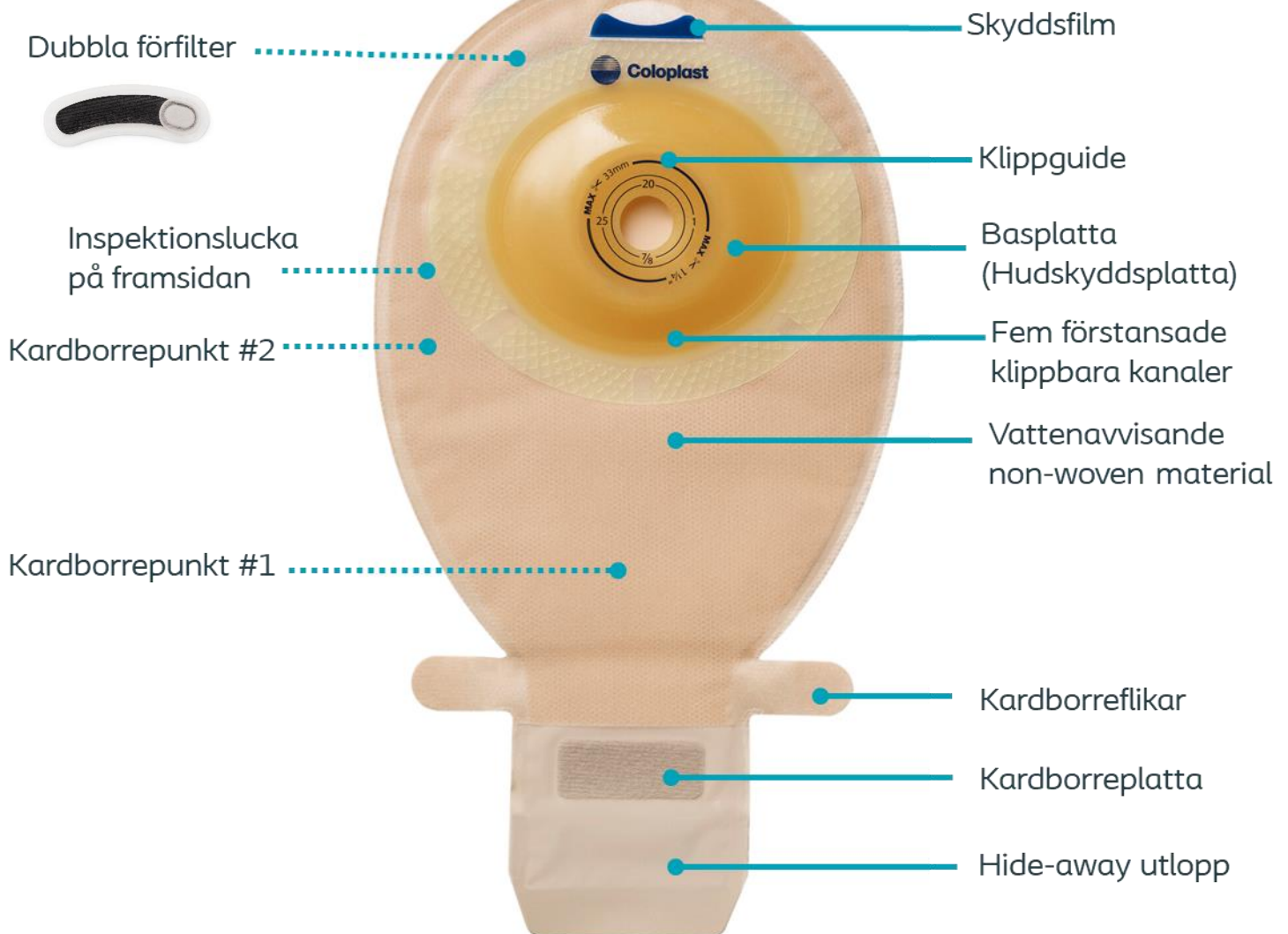

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com). Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

# Produktinformation

## Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage. SenSura® 1-dels Convex stomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med inbuktad kroppsprofil och stomier som behöver stöd eller hjälp att skjutas fram. Den slutna påsen är främst avsedd för kolostomi med fastare avföring och den tömbara påsen för ileostomi med tunnare avföring.

## Fördelar

- **Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd** – Basplattan är utformad för att fästa säkert och sitta tätt mot kroppen. Den skyddar huden och följer kroppens rörelser utan att lossna. Basplattan består av två lager och denna teknik är unik för Coloplast. (1) Hudvårdande lager som skyddar huden från fukt, absorberar överflödigt fukt och håller huden torr. (2) Skyddande lager som skapar en säker förslutning mellan basplattan och stomin samt skyddar huden från avföring.
- **Basplattan som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring och bidrar därmed till god hudhälsa. Häftan innehåller pektin, vilket hjälper till att bibehålla hudens normala pH-nivå. SenSura basplatta gör inte ont att ta bort, lämnar minimala rester på huden och minimerar mekaniskt trauma.
- **Förstansade kanaler** i basplattan för bättre passform och följsamhet.
- **Dubbla förfilter** – SenSura filter neutraliserar lukt och ser till att gaser passerar ut så att inte påsen blåser upp sig. De dubbla förfiltren minskar risken för att kolfiltret täpps igen av avföring och tillåter ett jämt luftflöde.
- **Mjukt material** - Det mjuka non-woven tyget i beige färg är starkt och vattenavvisande samt tyst och behagligt mot huden.
- **Inspektionsslucka** – En inspektionsslucka på framsidan av påsen med transparent plast undertill gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Smidigt och hygieniskt hide-away utlopp på tömbar påse** – Enkelt att tömma påsen och rengöra utloppets mynning utan kladd. Utloppet stängs med ett integrerat kardborrelås som är tätt efter stängning. Utloppet kan vikas in och gömmas på framsidan för diskretion eller ökad komfort. Välj mellan två lägen: Kardborrepunkt #1 eller #2 (påsen halveras).
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava tvåpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **Brett sortiment** – SenSura stomisortiment består av förstansade och uppklippbara hålstorlekar, med påsar i olika storlekar i beige eller klar färg och med eller utan lucka för inspektion. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.


## SenSura Mio 1-dels

Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage.



## SenSura Convex Light för inbuktade kroppsprofiler

SenSura 1-dels Convex Light (djup 4,7 mm) är utformad för stomier som är svårare att bandagera, t.ex. en stomi som är i nivå med huden, indragen eller ligger i ett hudveck. Konvexiteten ger ett lätt tryck mot huden runt stomin för att stomin ska skjutas fram och därmed minska risken för läckage.

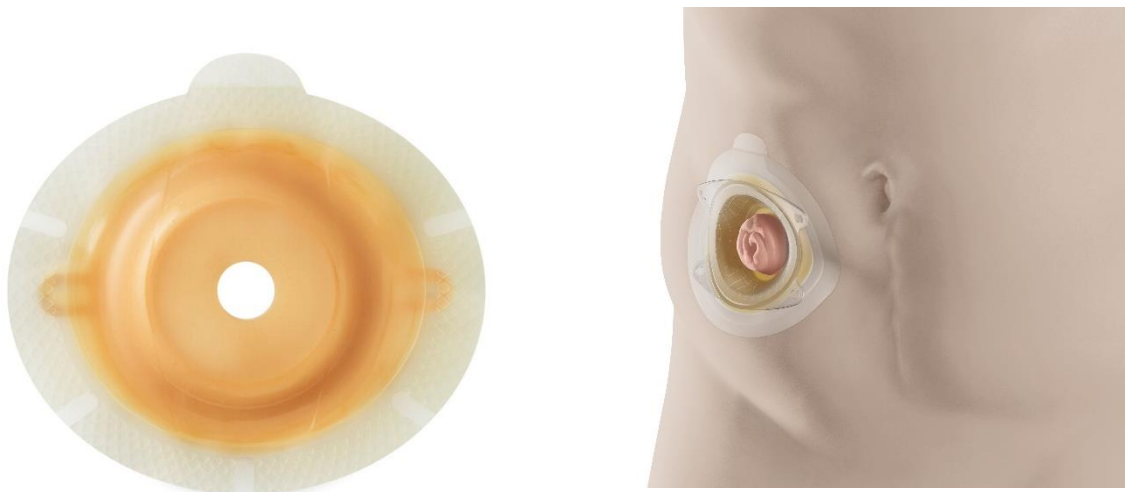

## Produktsortiment

### SenSura® 1-dels sluten Konvex Light

Beige

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunr
Midi	15-33 mm	340 ml		•	10	160	153030	730425
	15-33 mm	340 ml	•	•	10	160	150400	730027
	15-43 mm	340 ml		•	10	160	153040	730426
	15-43 mm	340 ml	•	•	10	160	150410	730028
	25-33 mm	340 ml		•	10	160	153130	730427
	25-33 mm	340 ml	•	•	10	160	150420	730029
	28-33 mm	340 ml		•	10	160	153140	730428
	31 mm	340 ml		•	10	160	153150	730429
	31 mm	340 ml	•	•	10	160	150430	730030
Maxi	15-33 mm	550 ml		•	10	160	153070	730430
	15-43 mm	550 ml		•	10	160	153080	730431
	15-43 mm	550 ml	•	•	10	160	150510	730032



### SenSura® 1-dels tömbar konvex Light

Beige

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunr
Midi	15-33 mm	420 ml	•	•	10	160	157000	730432
	15-43 mm	420 ml	•	•	10	160	157020	730433
Maxi	15-33 mm	650 ml	•	•	10	160	157010	730438
	15-43 mm	650 ml	•	•	10	160	157090	730439
	21-33 mm	650 ml		•	10	160	157320	730434
	25-33 mm	650 ml		•	10	160	157330	730435
	28-33 mm	650 ml		•	10	160	157340	730436
	31 mm	650 ml		•	10	160	157350	730437



## Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura 1-dels Convex sluten och tömbar påse ska användas, se separat bruksanvisning på [coloplast.se](https://coloplast.se).

Bruksanvisning/IFU:



[coloplast.to/bruksanvisningar](https://coloplast.to/bruksanvisningar)

## Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.  
Undvik direkt solljus.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

## Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](https://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).