

Elastisk
basplatta


Förfilter

Mjukt
utlopp

SenSura®

1-dels tömbar med mjukt utlopp

Stomibandage för postoperativt användande och för höga flöden

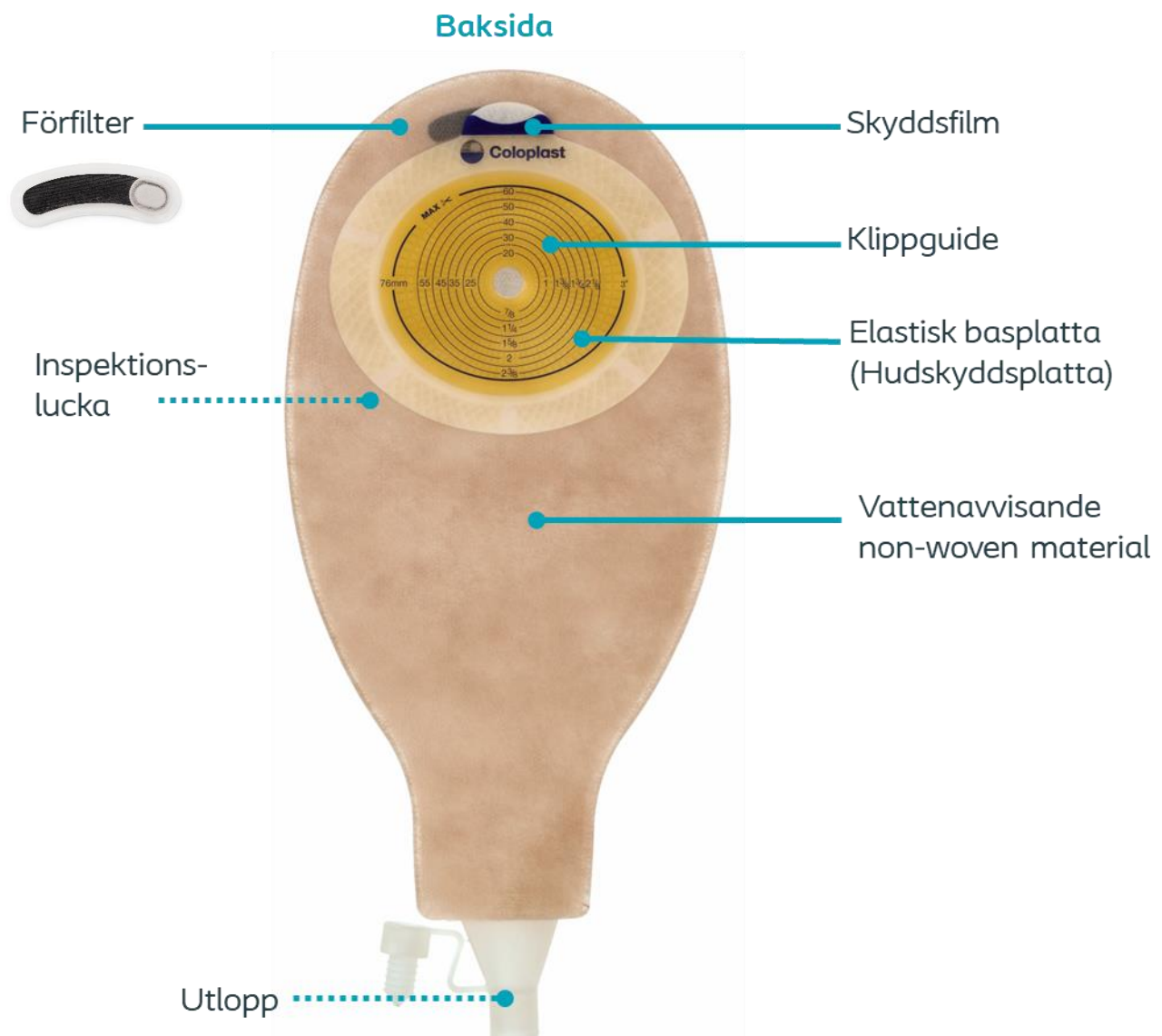

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage. SenSura® 1-dels tömbar påse med mjukt utlopp är huvudsakligen framtagen för postoperativt användande och för patienter med höga flöden.

Fördelar

- **Underlätta patientens övergång** - Patienterna kan använda en SenSura produkt direkt efter sin operation, vilket gör att de inte behöver lära sig ett nytt stomibandage allt eftersom behoven förändras. Underlättar en smidigare övergång till ett vanligt bandage - SenSura/ SenSura Mio.
- **Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd** - Basplattan är utformad för att fästa säkert och sitta tätt mot kroppen. Den skyddar huden och följer kroppens rörelser utan att lossna. Basplattan består av två lager och denna teknik är unik för Coloplast. (1) Hudvårdande lager som skyddar huden från fukt, absorberar överflödigt fukt och håller huden torr. (2) Skyddande lager som skapar en säker förslutning mellan basplattan och stomin samt skyddar huden från avföring.
- **Basplattan som skyddar huden** - De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring och bidrar därmed till god hudhälsa. Häftan innehåller pektin, vilket hjälper till att bibehålla hudens normala pH-nivå. SenSura basplatta gör inte ont att ta bort, lämnar minimala rester på huden och minimerar mekaniskt trauma.
- **Förstansade kanaler** i basplattan för bättre passform och följsamhet.
- **Förfilter** - SenSura filter neutraliserar lukt och ser till att gaser passerar ut så att inte påsen blåser upp sig.
- **Mjukt material** - Det mjuka non-woven tyget i beige färg är starkt och vattenavvisande samt tyst och behagligt mot huden.
- **Inspektionslucka** - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Effektiv tömning** - Mjukt utlopp med mindre innerlumen för lösare avföring.
- **Kan kopplas direkt till Coloplast Sängpåse** (artnr 140100) eller övriga säng/nattpåsar för minskat antal byten på natten
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Brett sortiment** - SenSura stomisortiment består av förstansade och uppklippbara hålstorlekar, med påsar i olika storlekar i beige eller klar färg och med eller utan lucka för inspektion. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

SenSura 1-dels

Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage.



Produktsortiment

SenSura® 1-dels tömbar med mjukt utlopp

Beige

Hålstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/tp	Artikelnr	Apoteksvarunr
10-76 mm	630 ml	•	30	360	190040	730862



Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura® 1-dels tömbar påse med mjukt utlopp ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.