

Unik
2-lagers
häfta

Fler-
kammars
påse

Mjukt
utlopp


SenSura[®]

2-dels Click Convex urostomipåse

Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd



Baksida

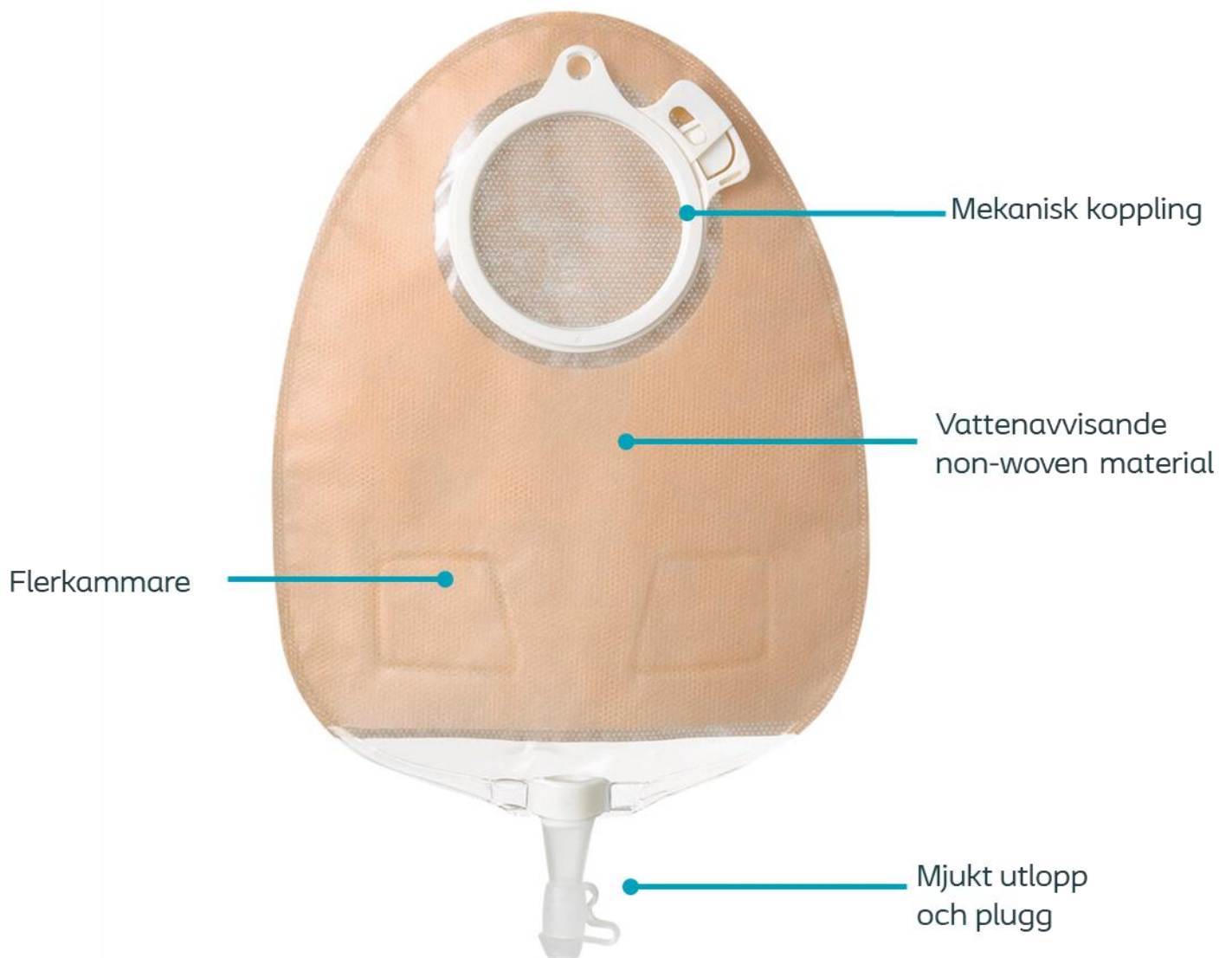

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla urin. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® 2-dels Click Convex urostomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med inbuktad kroppsprofil och stomier som behöver stöd eller hjälp att skjutas fram.

Fördelar

- **Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd** – Basplattan är utformad för att fästa säkert och sitta tätt mot kroppen. Den skyddar huden och följer kroppens rörelser utan att lossna. Basplattan består av två lager och denna teknik är unik för Coloplast. (1) Hudvårdande lager som skyddar huden från fukt, absorberar överflödigt fukt och håller huden torr. (2) Skyddande lager som skapar en säker förslutning mellan basplattan och stomin samt skyddar huden från avföring.
- **Basplattan som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring och bidrar därmed till god hudhälsa. Häftan innehåller pektin, vilket hjälper till att bibehålla hudens normala pH-nivå. SenSura basplatta gör inte ont att ta bort, lämnar minimala rester på huden och minimerar mekaniskt trauma.
- **SenSura Xpro för aggressiva flöden** – Basplattan är uppbyggd i två lager precis som SenSura standard basplatta men har en annan sammansättning för att ge bättre skydd mot aggressiva flöden, t ex urostomier och ileostomier. SenSura Xpro är mer motståndskraftig och ger en starkare vidhäftning mot huden. Potatismjöl i basplattan bildar en geléliknande konsistens som sväller och sluter tätt mot stomin.
- **Förstansade kanaler** i basplattan för bättre passform och följsamhet.
- **Mjukt material** - Det mjuka non-woven tyget i beige färg är starkt och vattenavvisande samt tyst och behagligt mot huden.
- **Backventil** – förhindrar urinen från att rinna tillbaka in mot stomin.
- **Mjukt utlopp** – utloppet är lätt att använda och kan gömmas undan när det inte används. Detta förhindrar att det skaver mot benet eller ljumsken, vilket ger bättre komfort och diskretion.
- **Utloppspluggen fjädrar tillbaka** efter öppning och är inte i vägen vid tömning.
- **Flerkammarpåse** – påsen är uppdelad i kammare som sprider urinen jämnt i påsen. Detta ger en platt, diskret profil och minskar skvalpande ljud.
- **Kan kopplas direkt till Coloplast Uro Sängpåse** (artnr 213650) – Utloppet på urostomipåsen kan kopplas direkt till sängpåsen utan att använda adaptor. Använd dock medföljande adaptor för att koppla ihop med urin-uppsamlingspåse från annan tillverkare.
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava tvåpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **Brett sortiment** – SenSura stomisortiment består av förstansade och uppklippbara hålstorlekar, med påsar i olika storlekar i beige eller klar färg och med eller utan lucka för inspektion. Det finns även ett brett utbud av höglödespåsar och postoperativa bandage.

SenSura 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.

- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan



SenSura Convex Light för inbuktade kroppsprofiler

SenSura 2-dels Convex Light (djup 4,7 mm) är utformad för stomier som är svårare att bandagera, t.ex. en stomi som är i nivå med huden, indragen eller ligger i ett hudveck. Konvexiteten ger ett lätt tryck mot huden runt stomin för att stomin ska skjutas fram och därmed minska risken för läckage.



Produktsortiment

SenSura® 2-dels Click Convex Light basplatta

Ringstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	15–23 mm	•	5	80	110110	220147
40 mm	21–23 mm	•	5	80	110120	220148
50 mm	15–33 mm	•	5	80	110210	220149
50 mm	25–33 mm	•	5	80	110220	220150
50 mm	28–33 mm	•	5	80	110230	220151
50 mm	31–33 mm	•	5	80	110240	220153
60 mm	15–43 mm	•	5	80	110310	220154
60 mm	35–43 mm	•	5	80	110320	220155



SenSura® 2-dels Click Xpro Convex Light basplatta

Ringstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	15–23 mm	•	5	80	110150	220447
40 mm	21–23 mm	•	5	80	110160	220448
50 mm	15–33 mm	•	5	80	110250	220449
50 mm	25–33 mm	•	5	80	110260	220450
50 mm	28–33 mm	•	5	80	110270	220451
50 mm	31–33 mm	•	5	80	110280	220452
60 mm	15–43 mm	•	5	80	110350	220453
60 mm	35–43 mm	•	5	80	110360	220454



SenSura® 2-dels Click Uro

Beige

	Ringstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	40 mm	430 ml	30	240	118410	220480
	50 mm	380 ml	30	240	118420	220481
Maxi	40 mm	550 ml	30	240	118440	220485
	50 mm	480 ml	30	240	118450	220486
	60 mm	460 ml	30	240	118460	220487



Klar*

	Ringstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	40 mm	430 ml	30	240	118510	220482
	50 mm	380 ml	30	240	118520	220484
Maxi	40 mm	550 ml	30	240	118540	220488
	50 mm	480 ml	30	240	118550	220489
	60 mm	460 ml	30	240	118560	220490

*Utan döljbart utlopp

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura 2-dels Click Convex urostomipåse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.