

Elastisk  
basplatta


Förfilter

Utlopp  
med större  
innerlumen

**SenSura**<sup>®</sup>

## 2-dels Click Magnum tömbar

Stomibandage för postoperativt användande och för höga flöden

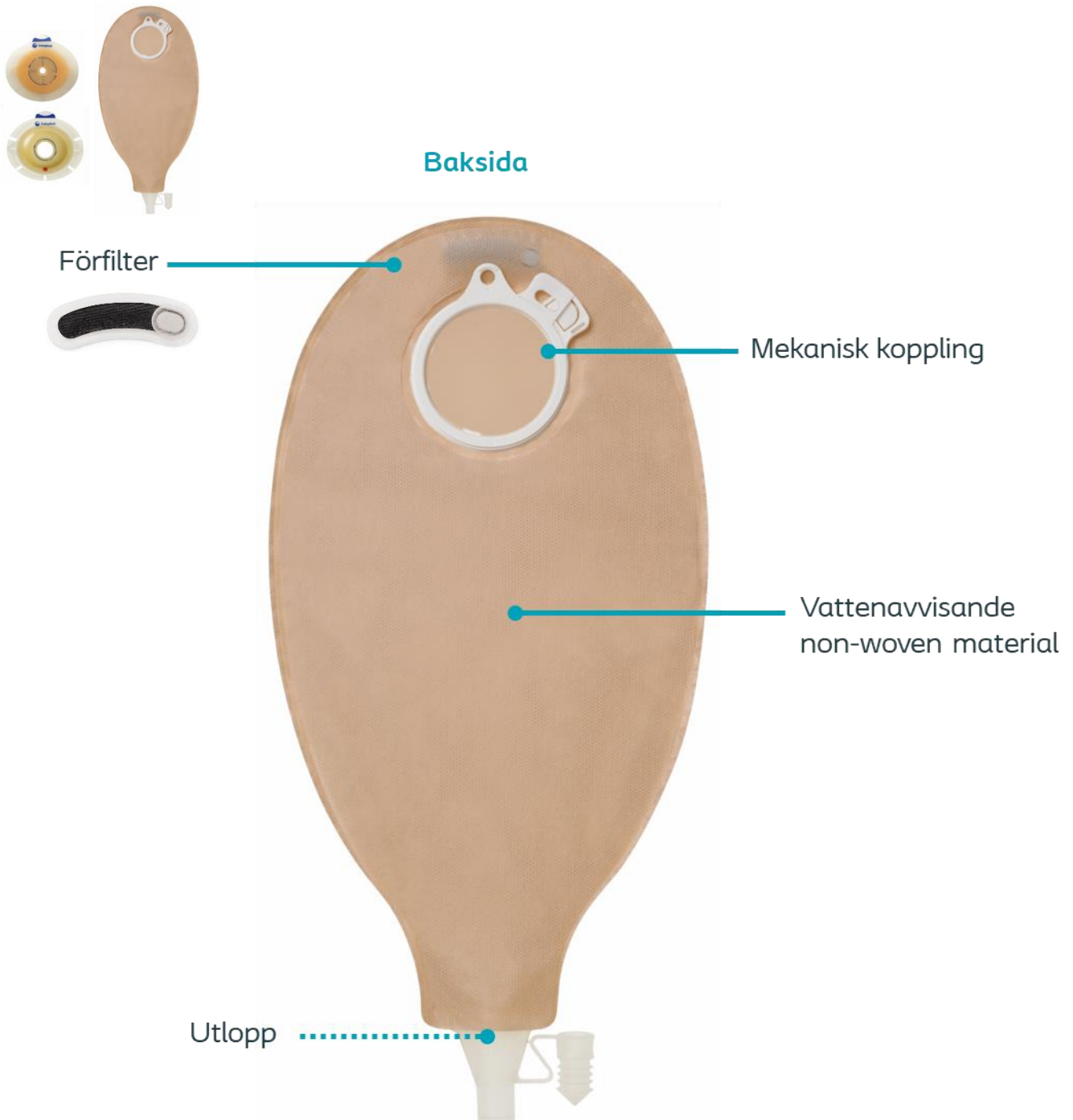

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com). Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

# Produktinformation

## Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® 2-dels Click Magnum tömbar är huvudsakligen framtagen för postoperativt användande och för patienter med höga flöden. Välj mellan en platt och konvex basplatta, beroende på om patientens stomi behöver hjälp med att skjutas fram.

## Fördelar

- **Underlätta patientens övergång** - Patienterna kan använda en SenSura produkt direkt efter sin operation, vilket gör att de inte behöver lära sig ett nytt stomibandage allt eftersom behoven förändras. Underlättar en smidigare övergång till ett vanligt bandage - SenSura/ SenSura Mio.
- **Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd** - Basplattan är utformad för att fästa säkert och sitta tätt mot kroppen. Den skyddar huden och följer kroppens rörelser utan att lossna. Basplattan består av två lager och denna teknik är unik för Coloplast. (1) Hudvårdande lager som skyddar huden från fukt, absorberar överflödigt fukt och håller huden torr. (2) Skyddande lager som skapar en säker förslutning mellan basplattan och stomin samt skyddar huden från avföring.
- **Basplattan som skyddar huden** - De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring och bidrar därmed till god hudhälsa. Häftan innehåller pektin, vilket hjälper till att bibehålla hudens normala pH-nivå. SenSura basplatta gör inte ont att ta bort, lämnar minimala rester på huden och minimerar mekaniskt trauma.
- **Välj mellan olika basplattor** - Välj en platt och konvex basplatta, beroende på om patientens stomi behöver hjälp med att skjutas fram.
- **Förstansade kanaler** i basplattan för bättre passform och följsamhet.
- **Förfilter** - SenSura filter neutraliserar lukt och ser till att gaser passerar ut så att inte påsen blåser upp sig.
- **Mjukt material** - Det mjuka non-woven tyget i beige färg är starkt och vattenavvisande samt tyst och behagligt mot huden.
- **Effektiv tömning** - styvare utlopp med större innerlumen för tjockare flöden
- **Kan kopplas direkt till Coloplast Sängpåse** (artnr 140100) eller övriga säng/nattpåsar för minskat antal byten på natten
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** - Använd Brava tvåpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **Brett sortiment** - SenSura stomisortiment består av förstansade och uppklippbara hålstorlekar, med påsar i olika storlekar i beige eller klar färg och med eller utan lucka för inspektion. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

## SenSura 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.

- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan.



## Produktsortiment

### SenSura® 2-dels Click Magnum tömbar med original utlopp

#### Beige

Ringstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	1160 ml		10	100	190400	732209
50 mm	1120 ml		10	100	190410	732210
60 mm	1080 ml		10	100	190420	732211



## Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura® 2-dels Click Magnum tömbar ska användas, se separat bruksanvisning på [coloplast.se](https://coloplast.se).

Bruksanvisning/IFU:



[coloplast.to/bruksanvisningar](https://coloplast.to/bruksanvisningar)

## Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.  
Undvik direkt solljus.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

## Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](https://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).