

Unik
2-lagers
häfta

Fler-
kammars
påse

Mjukt
utlopp


SenSura®

2-dels Click Platt urostomipåse

Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd



Baksida

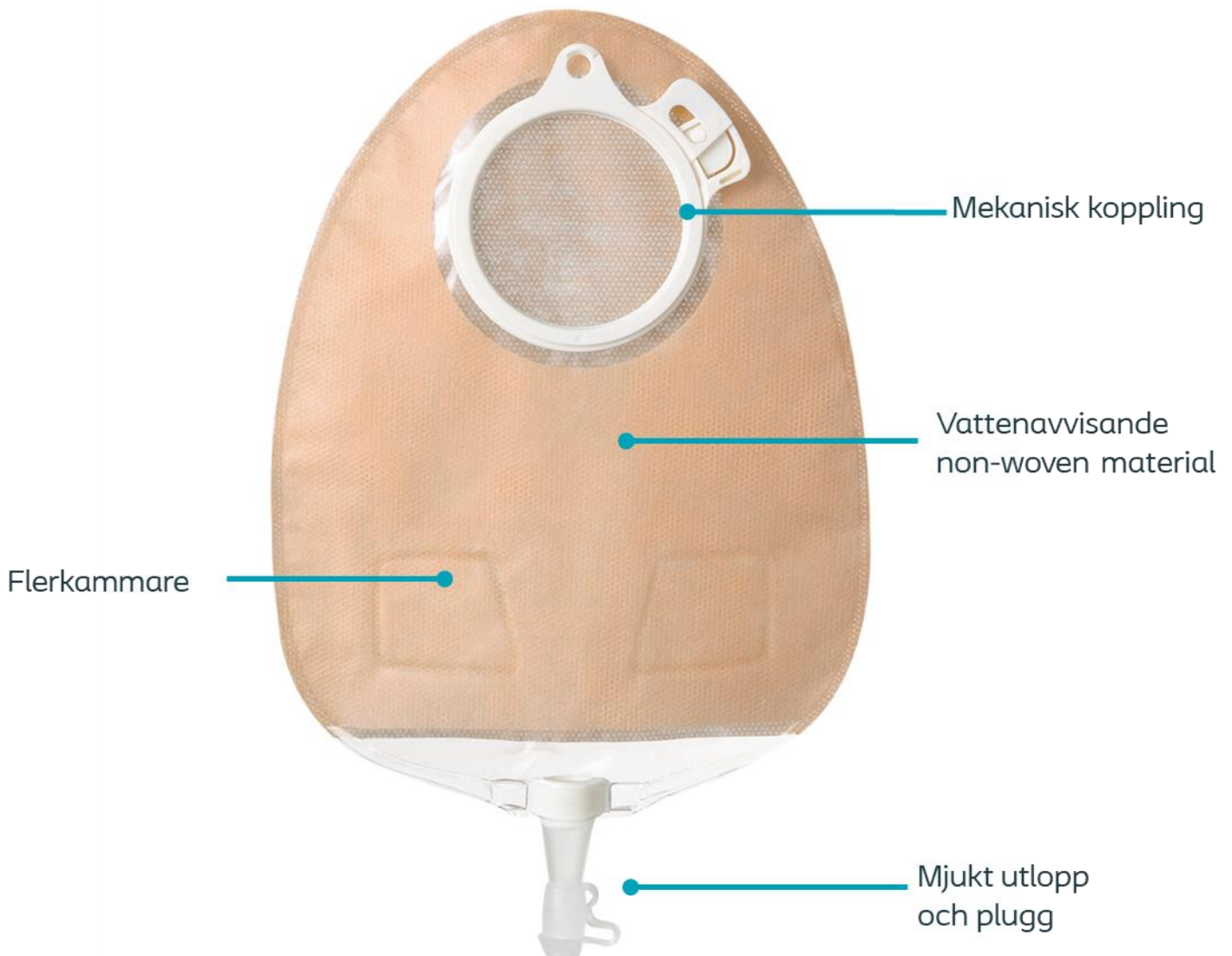

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och urin. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® 2-dels Click Platt urostomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med platt peristomal kroppsprofil.

Fördelar

- **Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd** – Basplattan är utformad för att fästa säkert och sitta tätt mot kroppen. Den skyddar huden och följer kroppens rörelser utan att lossna. Basplattan består av två lager och denna teknik är unik för Coloplast. (1) Hudvårdande lager som skyddar huden från fukt, absorberar överflödigt fukt och håller huden torr. (2) Skyddande lager som skapar en säker förslutning mellan basplattan och stomin samt skyddar huden från avföring.
- **Basplattan som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring och bidrar därmed till god hudhälsa. Häftan innehåller pektin, vilket hjälper till att bibehålla hudens normala pH-nivå. SenSura basplatta gör inte ont att ta bort, lämnar minimala rester på huden och minimerar mekaniskt trauma.
- **SenSura Xpro för aggressiva flöden** – Basplattan är uppbyggd i två lager precis som SenSura standard basplatta men har en annan sammansättning för att ge bättre skydd mot aggressiva flöden, t ex urostomier och ileostomier. SenSura Xpro är mer motståndskraftig och ger en starkare vidhäftning mot huden. Potatismjöl i basplattan bildar en geléliknande konsistens som sväller och sluter tätt mot stomin.
- **Förstansade kanaler** i basplattan för bättre passform och följsamhet.
- **Mjukt material** - Det mjuka non-woven tyget i beige färg är starkt och vattenavvisande samt tyst och behagligt mot huden.
- **Backventil** – förhindrar urinen från att rinna tillbaka in mot stomin.
- **Mjukt utlopp** – utloppet är lätt att använda och kan gömmas undan när det inte används. Detta förhindrar att det skaver mot benet eller ljumsken, vilket ger bättre komfort och diskretion.
- **Utloppspluggen fjädrar tillbaka** efter öppning och är inte i vägen vid tömning.
- **Flerkammarpåse** – påsen är uppdelad i kammare som sprider urinen jämnt i påsen. Detta ger en platt, diskret profil och minskar skvalpande ljud.
- **Kan kopplas direkt till Coloplast Uro Sängpåse** (artnr 213650) – Utloppet på urostomipåsen kan kopplas direkt till sängpåsen utan att använda adaptor. Använd dock medföljande adaptor för att koppla ihop med urin-uppsamlingspåse från annan tillverkare.
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava tvåpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **Brett sortiment** – SenSura stomisortiment består av förstansade och uppklippbara hålstorlekar, med påsar i olika storlekar i beige eller klar färg och med eller utan lucka för inspektion. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

SenSura 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura Mio 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.

- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan.



Produktsortiment



SenSura® 2-dels Click basplatta

Ringstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	10–35 mm		5	160	100010	220132
40 mm	10–35 mm	•	5	160	100110	220136
40 mm	20–35 mm	•	5	160	100120	220138
40 mm	25–35 mm	•	5	160	100130	220139
50 mm	10–45 mm		5	160	100020	220133
50 mm	10–45 mm	•	5	160	100210	220140
50 mm	30–45 mm	•	5	160	100220	220141
50 mm	35–45 mm	•	5	160	100230	220142
60 mm	10–55 mm		5	160	100030	220134
60 mm	10–55 mm	•	5	160	100310	220143
60 mm	40–55 mm	•	5	160	100320	220144



SenSura® 2-dels Click Xpro basplatta

Ringstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	10–35 mm	•	10	160	100150	220437
40 mm	20–35 mm	•	10	160	100160	220438
40 mm	25–35 mm	•	10	160	100170	220439
50 mm	10–45 mm	•	10	160	100250	220440
50 mm	30–45 mm	•	10	160	100260	220441
50 mm	35–45 mm	•	10	160	100270	220443
60 mm	10–55 mm	•	10	160	100350	220444
60 mm	40–55 mm	•	10	160	100360	220445

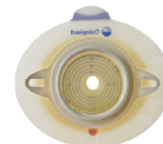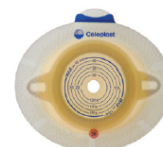

SenSura® 2-dels Click Uro

Beige

	Ringstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	40 mm	430 ml	30	240	118410	220480
	50 mm	380 ml	30	240	118420	220481
Maxi	40 mm	550 ml	30	240	118440	220485
	50 mm	480 ml	30	240	118450	220486
	60 mm	460 ml	30	240	118460	220487



Klar*

	Ringstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	40 mm	430 ml	30	240	118510	220482
	50 mm	380 ml	30	240	118520	220484
Maxi	40 mm	550 ml	30	240	118540	220488
	50 mm	480 ml	30	240	118550	220489
	60 mm	460 ml	30	240	118560	220490

*Utan döljbart utlopp

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura 2-dels Click Platt urostomipåse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.